

permobil

M3 CORPUS®



**UNIK
KJØREOPPLEVELSE**

M3 CORPUS® – DIN UNIKE KJØREOPPLEVELSE

En formidabel kombinasjon av chassis og sete.

M3 Corpus® følger de naturlige kroppsbevegelsene og gir deg en stabil og mer komfortabel kjøreopplevelse, slik at du kan sitte lenger, nå mer og gjøre mer.

M3 Corpus® setter en ny standard for kvaliteten i en midthjulsdrevet rullestol. Kombinasjonen av den utmerkede **Smooth** fjæringen, styringen og setet gir deg komplett løsning for dine mobilitets behov.

Setesystemet til Corpus® er fullstendig tilpassbart og har vist seg å redusere faren for at brukere utvikler trykksår. Med hele fem

elektriske setefunksjoner og tre programmerbare seteminner er du sikret en høy grad av komfort og velvære. Vi tilbyr et stort utvalg kroppsstøtter og annet tilbehør som gjør at du skal kunne sitte avslappet lenger i stolen og dermed få mer ut av dagen.

Vår nyeste styrespak har BLUETOOTH® og IR-teknologi, som betyr at du kan koble deg til mobiltelefonen, styre nettbrettet eller PC-en og andre funksjoner i hjemmemiljøet*, for eksempel betjening av TV eller belysning.

*Kan kreve ytterligere utstyr i hjemmet, som ikke leveres av Permobil.

EGENSKAPER



Smooth fjæring

Smooth-fjæring gir utmerket komfort, stabilitet og grep i hellinger og over hindringer, inne og ute. Enkel og robust design med få deler, noe som gjør den pålitelig og lett å vedlikeholde.



Active Height

Deltakelse hele dagen. Kan kjøres med setet helt hevet opptil 5 km/h, med full fjæringsfunksjonalitet. Dette er det høyeste som for tiden er mulig i en midthjulsdrevet rullestol.

Active Reach

Opptil 20° tilt forover* kan brukes selv når setet er hevet helt, noe som gir deg større rekkevidde.

*Over 10° krever ekstra støtte.

FORDELER

The M3 Corpus® – revolutionising the power wheelchair – again

M3 Corpus® – revolusjonerer den elektriske rullestolen – igjen. I 50 år har Permobil vært ledende innen elektrisk rullestolsteknologi. Med M3 Corpus® har vi tenkt helt nytt når det gjelder hva en midthjulsdrevet rullestol kan gjøre, helt fra bunnen av.

Med M3 Corpus® sikrer vi at vi tilbyr den beste løsningen for brukerne. Vi forstår at det er viktig at kjøringen er komfortabel, intuitiv og at

rullestolene kan programmeres etter brukernes behov. Vi tilbyr en uovertruffen stabilitet gjennom et unik chassis design, finjustert fjæring og trepunkts setestabilisering.

Denne stabiliteten gjør at vi kan flytte Corpus® setet forover, som betyr at det blir mindre stol foran deg, noe som igjen gir intuitiv kjøring, bedre tilkomst til ulike gjøremål og større uavhengighet.

Setesystemet støtter kroppen ergonomisk og gir en komfortabel kjøreopplevelse. Du kan tilte setet og endre ryggstøttevinkelen for å finne en komfortabel og avslappet stilling, men også for å sikre riktig avlastning av kroppen, noe som reduserer faren for trykksår.

TILBEHØR

Permobil Original Supports

- » Nakkestøtter
- » Sidestøtter
- » Lårstøtter
- » Leggstøtter
- » Hoftestøtter
- » Amputasjonsstøtte

Alternative styresystemer

- » Bluetooth-mus – styrer opptil 2 enheter (f.eks. PC og nettbrett)
- » Med IR kan du koble til og betjene hjemmemiljøet
- » En rekke spesialstyringer: Mini-Joystick, hakestyring, ledsagerstyringer, osv.

Holdere og bærere

- » Telefon- og nettbrett holdere
- » Koppeholder
- » Armleneveske
- » Medisinveske
- » Krykkeholder
- » Oksygenholder

Gliderygg – ryggstøtterejustering.

En stor fordel med Corpus-setet er den utmerkede glideryggen. Den gjør at ryggplaten forblir i optimal posisjon i forhold til kroppen og hode er på hodestøtten i alle vinkler fra sittende til horisontalt.

Corpus® setesystem.

Tilbyr en rekke elektriske setefunksjoner med en rekke kliniske fordeler.

Active Height seteløfter

Nå trenger du ikke gå glipp av samtaler lenger. Kjør med setet helt opp og i 5 km/t, med full fjæringseffektivitet. Dette er det høyeste som for tiden er mulig i en midthjulsdrivet rullestol.

Uovertruffen stabilitet.

Enkel og robust design.

Tilkobling.

BLUETOOTH® og IR-teknologi er integrert i styrepanelet, slik at brukeren kan styre opptil to PC-er eller nettbrett, og koble seg til telefonen, betjene TV eller belysningen. Koble deg til hjemmemiljøet!

Minnefunksjoner gjør det lett å finne trykkavlastende stillinger og IRM-modus (uavhengig posisjonering).

Maks. hastighet
er 10 km/t.

Tilpass stolen
med din favorittfarge.



Smooth fjæring gir komfortabel kjøring. 6 hjul har kontakt med underlaget for å sikre stabilitet under kjøring.

Vibrasjonsdempende design sikrer jevn styring og stabil kjøring.



SPESIFIKASJONER

Lengde inkl. sete	1080 mm
Chassisbredde	615 mm
Bredde inkl. sete	615–790 mm
Høyde	960–1170 mm
Min. transportlengde	795–855 mm
Min. transporthøyde	823 mm
Setehøyde	450 mm
Setehøyde med elektrisk seteløfter	450–750 mm
Vekt inkl. batterier 60/73 Ah	175 kg/183 kg
Vekt batterier 60/73 Ah	2x19 kg/2x23 kg
Maks. brukervekt	150 kg
Setebredde	420–570 mm (ved 50 mm)
Setedybde	370–570 mm (ved 25 mm)
Ryggstøttebredde	360/410/460/510 mm
Ryggstøttehøyde	470, 545–670 mm (ved 25 mm)
Avstand mellom armstøttene	380–480/480–580 mm
Armstøttehøyde	185–320 mm
Kjørelengde 60/73 Ah	25 km/30 km*
Maks. hastighet	10 km/h

Svingradius (ISO 7176-5)	560 mm
Sving i korridor	1110 mm
Hindringshøyde	50/75 mm
Fjæring	Ja
Elektronikk R-net	120 A
Elektrisk seteløfter	0–300 mm
Elektrisk tiljustering bakover	50°
Elektrisk tiljustering forover	0–10° (standard beinstøtte) 0–20° (VS beinstøtte)
Elektrisk beinstøtteregulering	90–180° (standard fotplater)
Elektrisk ryggstøtteregulering	85–150°, 85–180°
Manuell ryggstøtteregulering	90–135°
Kollisjons testet etter ISO 7176-19	Ja, opp til 136 kg med Dahl docking system
Kollisjons testet etter ISO 10542-3 stopper	Ja, opp til 150 kg

EN12182/EN12184 CE

*Kjørelengden kan gå ned hvis rullestolen kjøres mye i hellinger, ujevnt underlag eller ofte forserer fortauskanten.

ELEKTRISKE FUNKSJONER



Tiltjustering forover



Tiltjustering bakover



Seteløfter



Beinstøtteregulering



Ryggstøtteregulering

FARGER



SUNBURST ORANGE



RADIANT RED



POWER PINK



OCEAN BLUE



GALACTIC GREEN




MIDNIGHT BLACK

POLSTRING



KUNSTSKINN

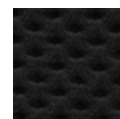

SVART STOFF

Disse spesifikasjonene kan variere alt etter konfigurasjonen til rullestolen. Begrensninger i setefunksjonene kan kreves i bestemte konfigurasjoner avhengig av brukerens vekt. Hvis du ønsker mer informasjon enn det som er gitt her, kan du se brukerhåndboken, som du kan laste ned fra Permobil sin webside.

permobil

Permobil AS | Besøksadresse: Industriveien 16, 1481 HAGAN | Postadresse: Postboks 60, 1483 HAGAN, Norway
Telefon: +47 815 30 077 | ks@permobil.no | www.permobil.com