

Permobil

M3 Corpus[®]



permobil

Mer frihet

M3 Corpus® har et kompakt understell som gjør det enkelt å manøvrere på trange steder, samtidig som den også er svært god å bruke utendørs. Den leveres med omfattende funksjonalitet og stabilitet i ulike sittestillinger.

Corpus® – følger kroppens konturer

Setesystemet til Corpus® har et ergonomisk design som følger kroppens konturer. Bedre komfort, bekkenposisjon og sidestabilitet er alle viktige egenskaper ved de nye Corpus-seteputene.

Seteputene er betydelig forbedret ved å innføre en tykkere ryggpute med to-lag skumplast i mykere densitet, en sittepute med større fordypning til bekkenet og et nytt, pustende Stretch-Air™ stofftrekk som kan vaskes i maskin på 60 °C.

Active Reach

Vipper setet forover opptil 20°, og hever det for å øke den funksjonelle rekkevidden, noe som er til hjelp ved overføring til og fra stolen og i de daglige aktivitetene.

Active Height

Gjør at du kan kjøre i opptil 5 km/t med seteløfter i øverste posisjon, og kombineres enkelt med *Active Reach* for å få den optimale tilgangen til omgivelsene.

Elektrisk justering av sittestilling


Myk og sikker elektrisk justering av sittestilling, smidig tilpasning og godkjent for brukere opptil 150 kg.

Bedre kjøreegenskaper

Med det nye Permobil-batteriet og Permobil VoltPro-laderen får du bedre rekkevidde, kortere ladetid og lengre batterilevetid.

Tryggere kjøring etter mørkets frembrudd

Valgfrie LED-lys foran og bak for bedre lysstyrke og synlighet.

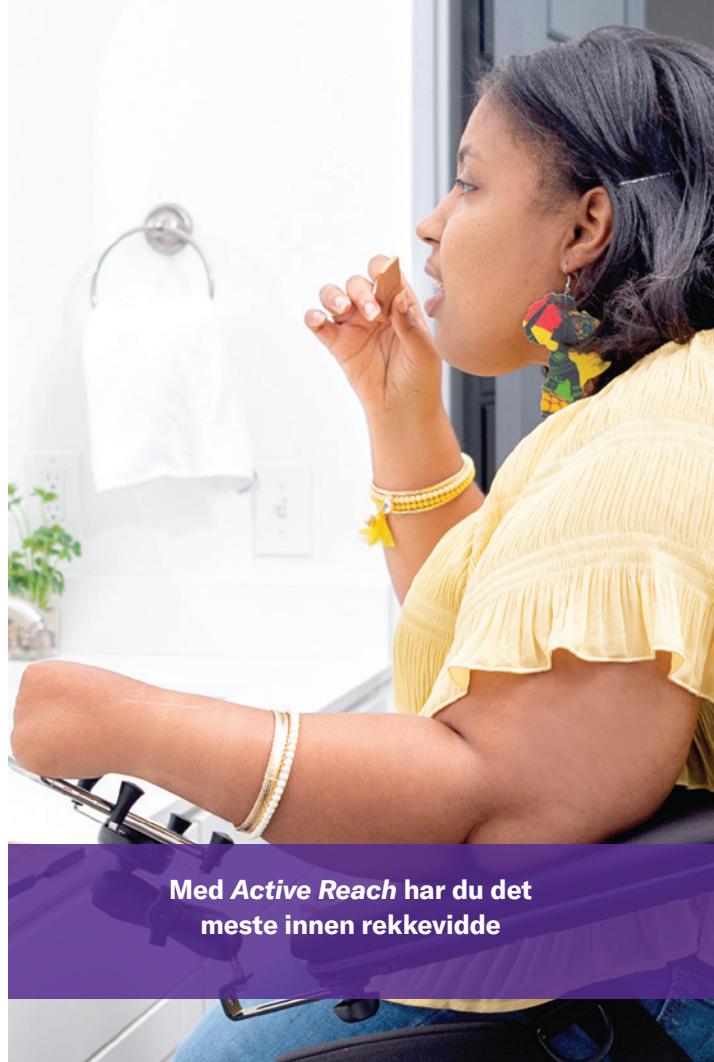

Med *Active Reach* har du det meste innen rekkevidde



Med elektrisk justering av sete kan du enkelt variere sittestillingen

M3 Corpus® Spesifikasjoner

Maks. hastighet	8/10 km/t
Rekkevidde (G24: 85 Ah-batterier)	40 km*
Maks. brukervekt	150 kg
Forsering av hindringer (med tilløp)	50 mm (75 mm)
Min. svingdiameter	1120 mm
Snu i korridor	1100 mm
Støtdemping	Smooth
Elektronikk R-net	120 A
Bredde inkl. sete	650–790 mm
Høyde	960–1170 mm
Min. transportlengde	855 mm
Min. transporthøyde (sammenfoldet ryggstøtte)	825 mm
Vekt inkl. batterier 65 Ah	176 kg
Vekt batterier 65 Ah	2 x 17 kg
Setehøyde (med elektrisk seteløfter)	450–750 mm
Setedybde	370–570 mm (med 25 mm steg)
Setebredde	420–570 mm (med 50 mm steg)
Ryggstøttebredde	360/410/460/510 mm
Ryggstøttehøyde	470, 545–670 mm (med 25 mm steg)
Avstand mellom armlenene	380–480/480–580 mm

Tilpass rullestolen

SKY

VIOLET

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATINUM

FLAMINGO



Seteløfter
Active Height 0–300 mm



Tilt forover
*Active Reach** 5–20°
20° krever VS-beinstøtte



Elektrisk/manuell
beinstøtte 90–180°



Elektrisk ryggstøtte-
regulering 85–180°
Manuell ryggstøtte
90–135°



Tilt bakover 0–50°



Armlenehøyde
185–320 mm

Høyde fra sete
til gulv 450 mm

Bredde
615 mm

Maks. lengde inkl. sete
1080 mm

*Kjøreforhold og valg av batteritype.
Målene er anslagsvis og kan endres ved behov.

**Utforsk den ultimate
fordelen** det er å få
tilgang til flere miljøer.

Permobil

M3 Corpus®

M3 Corpus er konstruert for å gi
høy komfort, god manøvrerbarhet,
perfekt stabilitet og tilgang til de
fleste steder og miljøer.

M3 Corpus gir rett og slett mer frihet.

