

Permobil

F5 Corpus[®] VS



permobil

Stå oppreist der du vil

F5 Corpus® VS gir enestående kjørekvalitet takket være et helt uavhengige firehjulsoppheng. Sammen med alle de elektriske setefunksjonene til F5 Corpus kommer i tillegg fordelene ved å stå oppreist.

Føl deg trygg

Å kunne stå oppreist bidrar til større uavhengighet. F5 Corpus VS har programmerbare ståsekvenser, slik at posisjonen kan individuelt optimaliseres fra liggende, delvis tilbakelent eller fra sittende til stående stilling. Tilpass ståstillingen ytterligere med justerbar bryststøtte, formbare knestøtter og elektriske fotplater.

Corpus® – følger kroppens konturer

Corpus-setesystemet har en ergonomisk design som følger kroppens konturer. Bedre komfort, bekkenposisjon og sidestabilitet er alle viktige egenskaper ved de nye Corpus-seteputene.

Active Reach

Vipper setet fremover opptil 45° for å øke den funksjonelle rekkevidden. Funksjonen kan også bidra til en enklere forflytning inn og ut av stolen eller til andre daglige aktiviteter.

Active Height

Gjør at du kan kjøre i opptil 5 km/t med seteløfter i øverste posisjon, og kombineres enkelt med *Active Reach* for å få den optimale tilgangen til omgivelsene.

Agile-fjæring

Den uavhengige fjæringen på alle hjul gir overlegen kjørekomfort, trekraft og stabilitet, og er spesielt nyttig ved aktiv kjøring utendørs.

Bedre kjøreegenskaper


Med det nye Permobil-batteriet og Permobil VoltPro-laderen får du bedre rekkevidde, kortere ladetid og lengre batterilevetid.

Tryggere kjøring etter mørkets frembrudd

Valgfrie LED-lys foran og bak for bedre lysstyrke og synlighet.



Det å stå bidrar til større uavhengighet og reduserer belastningen på sitteknutene

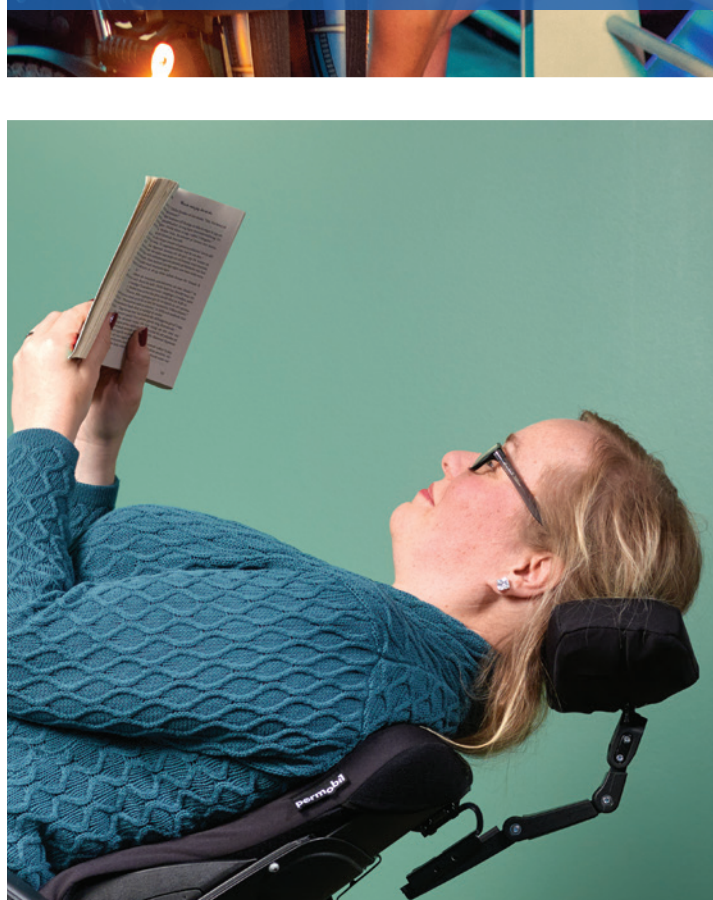

Med elektrisk justering av sete kan du enkelt variere sittestillingen



Spesifikasjoner for F5 Corpus® VS

Tilpass rullestolen

SKY

VIOLET

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATINUM

FLAMINGO

Maks. hastighet	10 km/t
Rekkevidde (G24: 85 Ah-batterier)	40 km*
Maks. brukervekt	136 kg
Forsering av hindringer (med tilløp)	50 mm (75 mm)
Min. svingdiameter	1490 mm
Snu i korridor	1200 mm
Støtdemping	Uavhengig på alle hjul
Elektronikk R-net	120 A
Bredde inkl. sete	650–790 mm
Høyde	1090–1170 mm
Min. transportlengde inkl. veltesikringer	965 mm
Min. transporthøyde (sammenfoldet ryggstøtte)	825 mm
Vekt inkl. batterier 85 Ah	206 kg
Vekt batterier 85 Ah	2x23 kg
Setehøyde (med elektrisk seteløfter)	450–800 mm
Setedybde	370–570 mm (med 25 mm steg)
Setebredde	420–570 mm (med 50 mm steg)
Ryggstøttebredde	360/410/460/510 mm
Ryggstøttehøyde	470, 545–670 mm (med 25 mm steg)
Avstand mellom armlenene	380–480/480–580 mm



Maks. ståvinkel 70°/80°
(sittende til stående eller
liggende til stående)



180° elektrisk justering
av ryggstøtte



Seteløfter
Active Height 0–350 mm



Elektrisk ryggstøtte-
regulering **85–180°**
Manuell ryggstøtte **120°**



Tilt forover
Active Reach* 5–45°
20° til 45° krever
VS-beinstøtte



Armlenehøyde
215–330 mm

Høyde fra sete
til gulv 450 mm

Bredde
630 mm

Lengde inkl. veltesikringer
1145 mm

*Kjøreforhold og valg av batteritype.
Målene er anslagsvis og kan endres ved behov.



Det å stå støtter
**samhandlinger ansikt
til ansikt** og bidrar
generelt til bedre helse.

Permobil

F5 Corpus® VS

Utforsk de mange fordelene med F5 Corpus VS. Den har alle funksjonene til F5 Corpus kombinert med overlegen elektrisk ståfunksjon. *Agile*-fjæringen gjør at du kan kjøre trygt i opptil 5 km/t.