

ROHO®

Hybrid Select

permobil



Exceptionellt sittande med hybridpositionering

Hybrid Selects yta för bäckenet anpassar sig efter användarens unika form, vikt och positionsändringar. ROHO®-luftinlägget i 3 zoner med IT luftinlägg är utrustat med ISOFLO® Memory Control som gör det möjligt att hitta och ställa in rätt position varje gång.

Unik sidostabilitet

Hybrid Selects innovativa design är utformad med god positioneringsförmåga genom en konturerad dyna i tåligt skum och skålade benstöd som stöttar, ger stabilitet i sidled och avlastar svanskotan/svansbenet.

Bevisat skonsam och skyddande för huden

Med Hybrid Select får du en verkligt funktionell stabilitet kombinerat med en konstruktion och material som ger ett mycket bra skydd för hud och mjukvävnad. Dynans konturerade design gör att bäckenet omsluts av luftfyllda celler som formas och anpassas efter kroppens rörelser och skyddar hud och mjukvävnad.

Extra avlastningsalternativ i standardutförandet

Hybrid Select är mer flexibel och anpassningsbar än många andra tryckavlastande dynor och underlättar positionering till rätt läge. Den är även konstruerad med ett borttagbart IT-luftinlägg för extra avlastning under sittknölna.

Kännetecken optimerat sittande



Hudskydd

Nedsänkningstest (ISO 16840-2) visar hur djupt kroppen sjunker in i dynan.

Test av omslutande stöd (ISO 16840-12) visar hur kroppsvikten bärs upp av dynan genom omslutning eller avlastning.

Skjuvtest (skjuvkraftssensor) visar i vilken utsträckning dynan interagerar med kroppen och deformerar vävnad.

Tryckmätning visar hur trycket fördelas mellan sittstödet och användaren.



Positionering

Test av glidmotstånd (ISO 16840-2) visar hur mycket kraft som krävs för att användaren ska glida framåt på dynan.



Stabilitet

Lateralt lutningstest (ISO 16840-13) visar dynans stabilitet vid lutning i sidled.

Mekaniska tester



Bra hållning och god viktfordelning ger en bekväm sittställning



Exceptionell avlastning och komfort

Hybrid Select Specifikationer

Överdrag	Stretch-Air®
Vikt	1,45 kg*
Användarens maxvikt	227 kg
Garantivillkor för dyna	36 månaders begränsad garanti
Garantivillkor för överdrag	6 månaders begränsad garanti




Storlekar

35,5 cm x 37,5 cm
35,5 cm x 42,5 cm
38,0 cm x 40,0 cm
38,0 cm x 42,5 cm
38,0 cm x 45,0 cm
40,5 cm x 40,0 cm

40,5 cm x 42,5 cm
40,5 cm x 45,0 cm
40,5 cm x 47,5 cm
40,5 cm x 52,5 cm
43,0 cm x 42,5 cm
43,0 cm x 45,0 cm

43,0 cm x 47,5 cm
43,0 cm x 52,5 cm
45,5 cm x 42,5 cm
45,5 cm x 45,0 cm
45,5 cm x 47,5 cm
45,5 cm x 52,5 cm

51,0 cm x 42,5 cm
51,0 cm x 45,0 cm
51,0 cm x 47,5 cm
51,0 cm x 52,5 cm

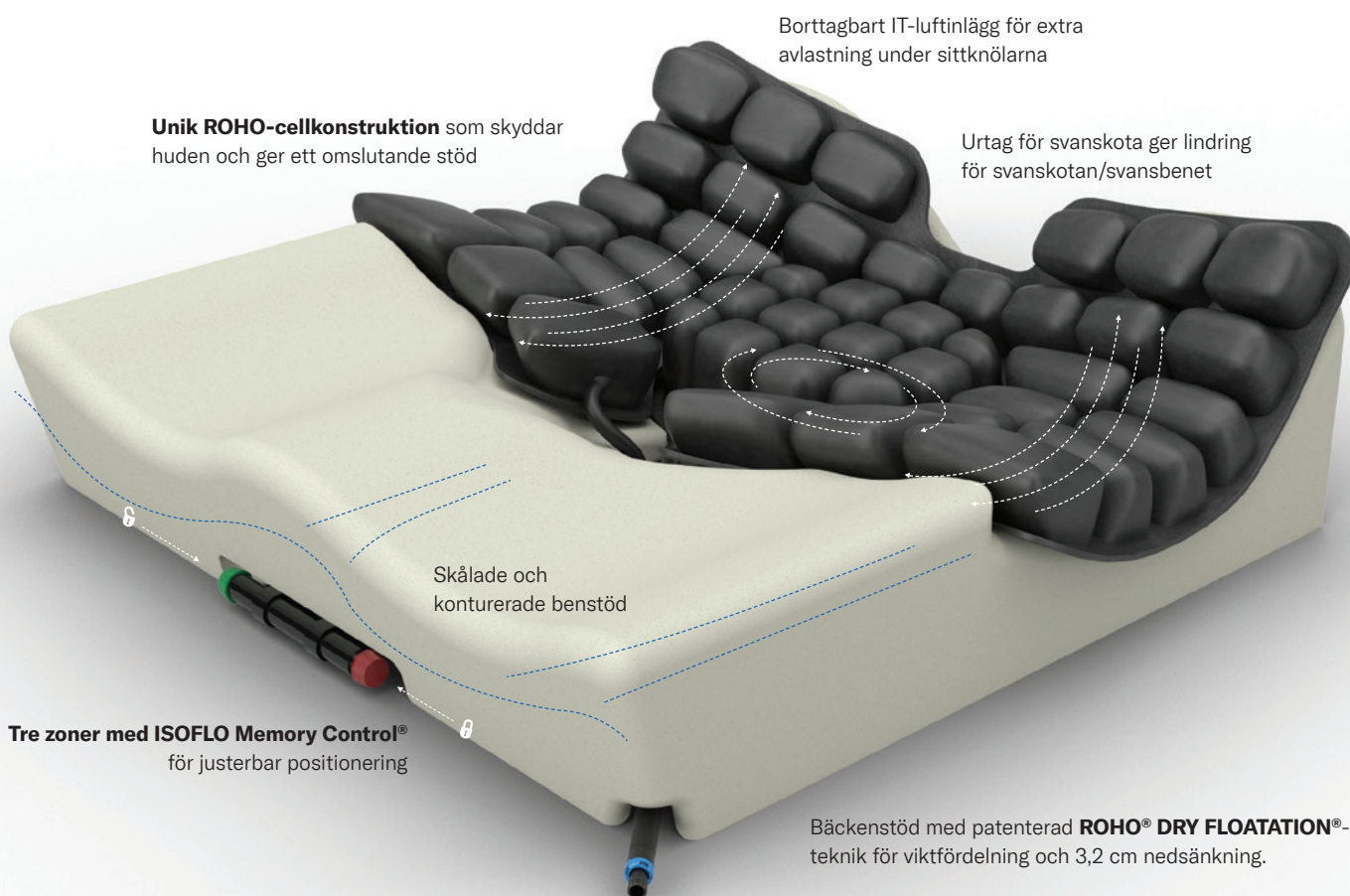


Hybrid Select
framifrån



Hybrid Select
sedd från vänster



Hybrid Select
vy bakifrån

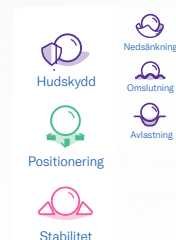

*Produktvikten baseras på en dyna i storlek 40,5 x 40,5. Produktens vikt varierar beroende på dynans storlek. Måtten är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

Hybrid Select ger mig
det positioneringsstöd jag
behöver och gör det enklare
för mig att förflytta mig.

– Eric, Permobil-användare

ROHO®

Hybrid Select

Hybrid Select är en avancerad tryckavlastande dyna med exceptionell positioneringsprestanda och stabilitet.

Den konturerade dynan i tåligt skum är utformad för att ge en optimerad positioneringskapacitet tack vare djupa, skålade benstöd och en konstruktion som ger stabilitet i sidled och avlastning för svanskotan/svansbenet.

permobil

permobil.se



HYBRIDSELECTDATASHEETSE211205