

Permobil

M3 Corpus[®]



permobil

Meer vrijheid

De M3 Corpus® heeft een compacte basis die een grote wendbaarheid biedt in krappe ruimtes, terwijl hij ook buiten uitstekend presteert. Hij wordt geleverd met uitgebreide functionaliteit en stabiliteit in verschillende zitposities.

Corpus® – volgt de contouren van het lichaam

Het Corpus®-zitsysteem heeft een ergonomisch ontwerp dat de contouren van het lichaam volgt. Een verbetering van het comfort, de bekkenpositionering, de laterale stabiliteit en opname in het kussen zijn stuk voor stuk belangrijke doelstellingen van de nieuwe Corpus-kussens.

Corpus-kussens zijn voorzien van zachter schuim met een dubbele dichtheid op de rugleuning, een nieuw ontworpen bekkenbodem en Stretch-Air™, een ademende, waterbestendige kussenstof die in de machine kan worden gewassen op 60 °C.

Active Reach

Kantelt de zitting tot 20° naar voren en verhoogt deze om het functionele bereik, de ondersteuning bij transfers en uw dagelijkse activiteiten te vergroten

Active Height

Biedt u de mogelijkheid om tot 5 km/uur te rijden met de zitlift op volledige hoogte en combineert dit naadloos met Active Reach om u het ultieme voordeel te geven bij het betreden van uw omgeving.

Elektrische rughoekverstelling

Soepele en veilige elektrische rughoekverstelling met naadloze schuifkracht-reductie voor elke gebruiker tot 150 kg.

Meer rijgemak

De nieuwe Permobil-accu en Permobil VoltPro-lader werken samen om u meer rijafstand, geoptimaliseerde laadtijden en een langere levensduur van de accu te bieden.

Veiliger rijden in het donker

Optionele LED-verlichting voor en achter voor een betere helderheid en zichtbaarheid.



Active Reach brengt de wereld echt binnen handbereik




De elektrische rughoekverstelling met naadloze schuifkracht-reductie

Specificaties M3 Corpus[®]

Maximalsnelheid	10 km/u
Actieradius (G24: 85 Ah accu's)	30-40 km*
Maximaal gebruikersgewicht	150 kg
Max. obstakelhoogte (met opgaande beweging)	50 mm (75 mm)
Min. draaicirkel	1120 mm
Draaien in gang	1100 mm
Vering	Smooth
Elektronica R-net	120 A
Breedte incl. zitting	650-790 mm
Hoogte	960-1170 mm
Minimale transportlengte	855 mm
Min. transporthoogte (ingeklapte rugleuning)	825 mm
Gewicht incl. accu's 65 Ah	176 kg
Gewicht van accu's 65 Ah	2 x 17 kg
Zithoogte (met elektrische stoellift)	450-750 mm
Zitdiepte	370-570 mm (per 25 mm)
Zitbreedte	420 - 570 mm (door 50 mm)
Rugleuningbreedte	360/410/460/510 mm
Hoogte rugleuning	470, 545-670 mm (door 25 mm)
Afstand tussen armleuningen	380-480/480-580 mm

Personaliseer uw rolwagen

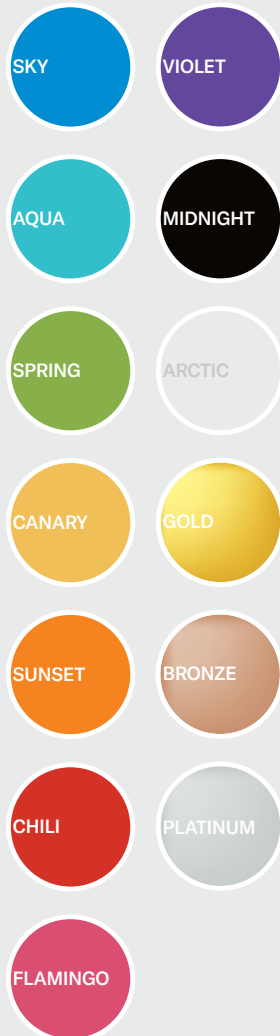

Zitlift
Active Height 0-300 mm



Voorwaartse kantelverstelling
Active Reach* 5-20°
Voor 20° is een VS-beensteun nodig



Elektrisch en handmatig verstelbare beensteun
90-180°



Elektrische rugverstelling **85-180°**
Handmatige rugleuning **90-135°**



Achterwaartse kantelverstelling **0- 50°**



*Rijomstandigheden en keuze van het accu type.

De afmetingen zijn bij benadering en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ontdek het ultieme
voordeel van toegang
tot de omgeving.

Permobil

M3 Corpus[®]

De zorgvuldig ontworpen M3 Corpus biedt betrouwbaarheid, comfort en een grote wendbaarheid, naast het ultieme voordeel van toegang tot de omgeving.

De M3 Corpus biedt gewoon meer vrijheid.

