


Permobil

# F3 Corpus<sup>®</sup>



KAFFEBROD	
Bullar	27
Wienerbröd	28
Gulbiter	83
Länglar	89
Wienerlänglar	89
Kranse	91
Wienerkranse	105
Ringslaktans	95
Dovmunka	105
Kaffe (varml.)	
Tesestängt	48
Pajer smör	135
Pajer smör	48
Korvskudde	48

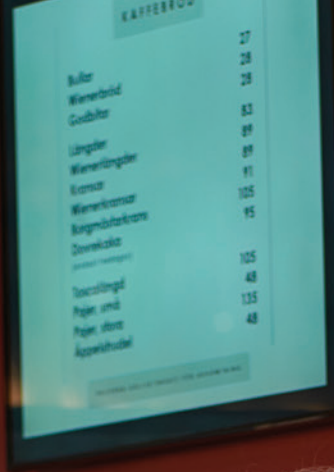

permobil

# Smidig framkomlighet i stadsmiljö

Den kompakta storleken och smidigheten hos F3 Corpus gör den enkel att manövrera in i och ut ur trånga utrymmen. *Smooth*-fjädringen möjliggör en bekväm körning i stadsmiljö.

## Corpus – följer kroppens konturer

Corpus sittsystem har en ergonomisk design som följer kroppens konturer. Förbättrad komfort, bäckenpositionering, sidostabilitet och ökad nedsjunkning är alla framträdande egenskaper hos den nya Corpus-sitsen.

Corpus dynor har mjukare skum med dubbel densitet på ryggstödet, ett nydesignat bäckenstöd och Stretch-Air™, ett andningsbart, vattentåligt dyntyg som kan maskintvättas i 60 °C.

## Active Reach

Lutar sitsen framåt med upp till 30 grader och höjer den för att utöka den funktionella räckvidden, hjälpa till vid förflyttningar och dina dagliga aktiviteter.

## Active Height

Gör att du kan köra i upp till 5 km/h i helt upphöjt läge och kombineras sömlöst med *Active Reach* för att ge dig den ultimata fördelen i att få tillgång till din miljö.

## Elreglerad ryggstödslutning

Smidig och säker elreglerad ryggstödslutning med glidrygg för sömlös reducering av skjuvningseffekterna för alla användare upp till 150 kg.

## Bättre körbarhet

Kombinationen av Permobil's nya batteri och VoltPro-laddare ger längre körsträcka, optimerade laddningstider och längre batterilivslängd.

## Säkrare körning i mörker

Som tillval finns LED-lampor fram och bak som ger bättre ljus och synlighet.



**Active Reach** lutar sitsen framåt med upp till 30 grader



**Den elreglerade ryggstödslutningen** med sömlös reducering av skjuvningseffekterna hjälper dig att byta position

# F3 Corpus<sup>®</sup> Specifikationer

Max hastighet	6/8/10 km/h
Räckvidd (G34: 65 Ah/G24: 85 Ah-batteri)	30–40 km*
Användarens maxvikt	150 kg
Hindertagningsförmåga	60/75 mm
Minsta vänddiameter	1 350 mm
Vändning i korridor	1 040 mm
Fjädring	Fristående fjädring på alla hjul
Elektronik R-net	120 A
Bredd inkl. sits	610–790 mm
Höjd	970–1170 mm
Min. transportlängd exkl./inkl. stödhjul	790/890 mm
Min. transporthöjd (ryggstöd nedfällt)	825 mm
Vikt inkl. batterier 65 Ah	172 kg
Vikt, batterier 65/85 Ah	2 x 17/2 x 23 kg
Sitshöjd (med elektrisk sitslyft)	450–750 mm
Sitsdjup	370–570 mm (25 mm steg)
Sitsbredd	420–570 mm (50 mm steg)
Ryggstödsbredd	360/410/460/510 mm
Ryggstödshöjd	470, 545–670 mm (25 mm-steg)
Avstånd mellan armstöd	380–480/480–580 mm
Krocktestad ISO 7176-19 – dockningssystem	Ja – användarens maxvikt 136 kg
Krocktestad ISO 7176-19 – remmar/spännband	Ja – användarens maxvikt 150 kg
Testad enligt SS-EN12182/SS-EN12184 CE	Ja

Anpassa din elrullstol

SKY

VIOLET

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATINUM

FLAMINGO



Sitslyft  
*Active Height* 0–300 mm



Sitslutning framåt  
*Active Reach\** 5–30°  
20° och 30° kräver  
VS-benstöd



Elektriskt och manuellt  
benstöd 90–180°



Elektriskt ryggstöd 85–180°  
Manuellt ryggstöd 120°



Sitslutning bakåt 0–50°



Armstödshöjd  
185–320 mm

Höjd sits till  
golv 450 mm

Basbredd  
610 mm

Längd exkl./inkl. stödhjul  
915–1015 mm

\*Körförhållanden och val av batterityp.  
Måtten är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

**Smooth fjädring  
och stabilitet kan vara  
skillnaden** mellan att  
tillbringa en timme eller  
hela dagen i en elrullstol.

Permobil

## F3 Corpus<sup>®</sup>

Storleksmässigt är F3 Corpus det lilla syskonet i vår familj av framhjulsdrevna elrullstolar. Dess storlek och manövrerbarhet gör att du kan röra dig snabbt in i och ut ur trånga utrymmen som myllrande gator och överfulla köpcentrum eller till och med kompakta lägenheter.

F3 Corpus ger en oerhört bekväm körning, så att du kan lägga din energi på att navigera i vardagen.