

Permobil

F5 Corpus[®] VS



permobil

Stehen ohne Kompromisse

Der F5 Corpus® VS Elektrorollstuhl bietet die Permobil Stehfunktion auf einer Vorderradbasis für mehr Stabilität und Fahrkomfort.

Selbstsicher stehen

Der F5 Corpus VS verfügt über eine völlig unabhängige Allradaufhängung, die Komfort, Traktion und Stabilität bietet, was besonders für aktives Fahren im Freien von Vorteil ist. Die einfache Programmierung der Stehkurven ermöglicht deren optimale Anpassung zum Beispiel aus der liegenden, halbliegenden oder sitzenden Position heraus.

Von persönlichen Interaktionen bis hin zu verbessertem gesundheitlichem Befinden – der F5 Corpus VS gibt Ihnen die Möglichkeit, selbstsicher zu stehen, während unsere leichten, schwenkbaren Kniestützen einen verbesserten Komfort und eine flexible Aufbewahrung am Stuhl für mehr Unabhängigkeit bieten.

Stehend bis zu 80°

Der F5 Corpus VS hat einen Stehwinkel von bis zu 80°, sodass Sie Alltagsaktivitäten wie Kochen, Einkaufen und Körperpflege selbstständig durchführen können.

Unabhängigkeit trifft dynamische Performance

Dank ihres geringen Gewichts lassen sich unsere schwenkbaren Kniepads mithilfe des leicht zugänglichen Entriegelungsmechanismus auch bei eingeschränkter Handfunktion selbstständig bewegen und bedienen. Wählen Sie aus zwei Padgrößen die für Sie passende und nehmen Sie mittels des integrierten BOA®-Systems* eine individuelle Feineinstellung vor, um die optimale Passform und Komfort zu erreichen.

Programmieren leicht gemacht

QuickConfig ist eine neue, innovative App, die für Servicetechniker, Therapeuten und Fachhändler entwickelt wurde. Sie bietet eine einfachere Möglichkeit zur Anpassung von Parametern und eine intuitive Benutzeroberfläche zur Einrichtung des F5 Corpus VS mit Ihren bevorzugten Fahr- und Sitzeigenschaften sowie Stehkurven..

Das *BOA® Fit System ermöglicht eine präzise Feinjustierung der Passform mittels eines einfach zu bedienenden Einstellrades.




F5 Corpus® VS Spezifikationen

Max. Geschwindigkeit	6, 10 und 12 km/h
Reichweite (G24: 85 Ah-Batterien)	40 km*
Max. Benutzergewicht	136 kg
Hindernisbewältigung (mit Schwung)	50 mm (75 mm)
Min. Wendekreis	1490 mm
Drehen im Flur	1200 mm
Federung	unabhängig auf allen Rädern
Max. Stehwinkel	80°
R-Net Electronics Power Platform	120 A
Breite einschl. Sitz	650–790 mm
Höhe	1090–1170 mm
Min. Transportlänge inkl. Antikippstützen	965 mm
Min. transporthöhe (gefaltete Rückenlehne)	825 mm
Gewicht, einschließlich Batterien (85 Ah)	206 kg
Gewicht der Batterien 85 Ah	2x23 kg
Sitzhöhe (mit elektrischer Sitzhöhenverstellung)	450–800 mm
Sitztiefe	370–570 mm (in 25-mm-Schritten)
Sitzbreite	420–570 mm (in 50-mm-Schritten)
Rückenlehnenbreite	360/410/460/510 mm
Rückenlehnenhöhe	470, 545-670 mm (in 25-mm-Schritten)
Armlehnenhöhe	215-330 mm
Abstand zwischen Armlehnen	380–480/480–580 mm

*Fahrbedingungen und Wahl des Akkutyps.
Die Angaben sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Dein F5 – Deine Farbe

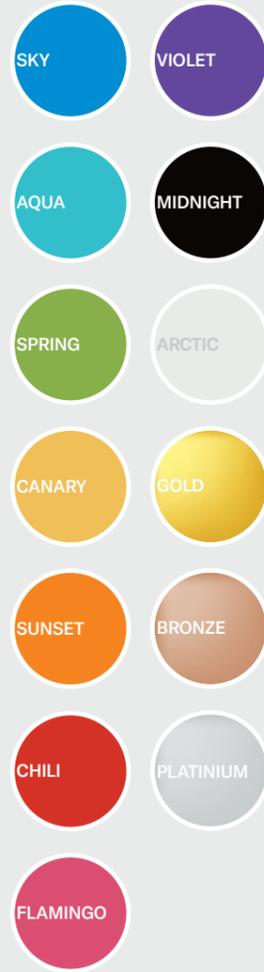

Chassisbreite
630 mm

Länge inkl. Antikippstützen
1145 mm

Stehen ermöglicht
die persönliche Interaktion
und sorgt für verbesserte
Gesundheitsergebnisse.

Permobil

F5 Corpus[®] VS

Entdecken Sie anhand des F5 Corpus VS die vielfältigen Vorteile eines Stehrollstuhls. Er verfügt über alle Leistungsmerkmale des F5 Corpus, ergänzt mit einer überlegenen elektrischen Stehfunktion. Die *Agile* Federung ermöglicht Ihnen ein sicheres Fahren im Stehen bei bis zu 2,4 km/h.