


Fauteuils électriques  
**M-Series**




**permobil**




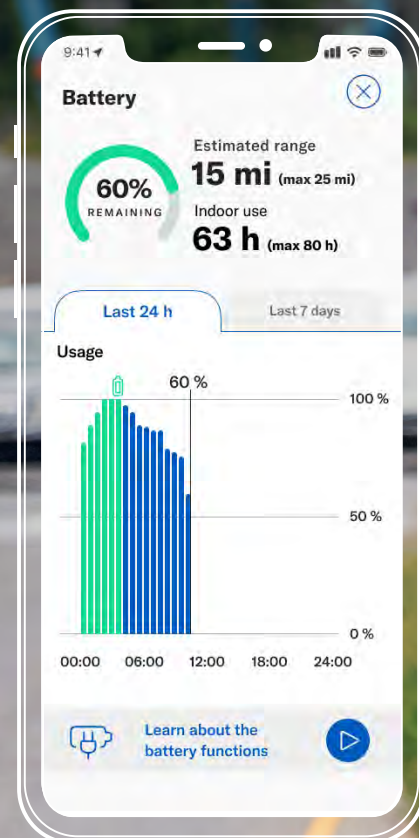

Le suivi de l'état et de l'autonomie de la batterie vous indique la distance que vous pouvez parcourir

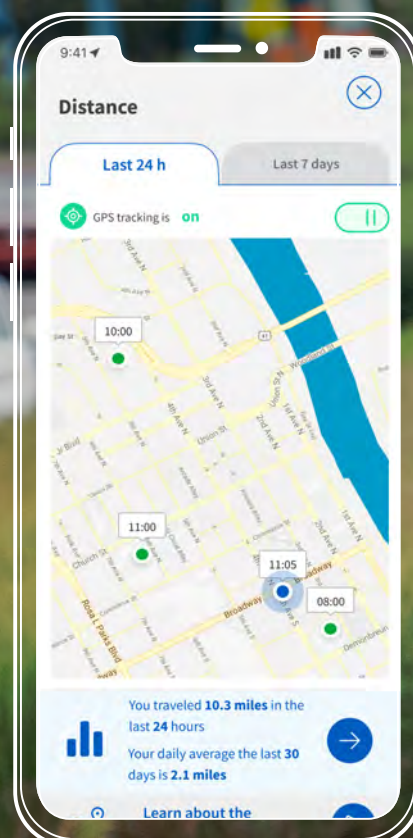

La carte géographique montre les plus récents trajets et l'historique des déplacements

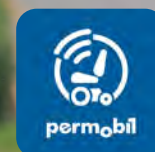

MyPermobil

La connectivité MyPermobil est une option disponible sur tous les nouveaux modèles M-Series Corpus.



## Plus d'autonomie

La nouvelle batterie Permobil et le chargeur VoltPro vous permettent d'aller 25% plus loin. De plus, la batterie se recharge plus vite et possède une durée de vie accrue. Utilisez l'application MyPermobil pour profiter encore plus de chaque aventure grâce à l'affichage des fonctionnalités d'assise, aux estimations de l'autonomie restante et à une carte géographique.



Jusqu'à 20 mi d'autonomie



Réduction du temps de recharge



Durée de vie de la batterie accrue

*App Store est une marque commerciale d'Apple Inc. Google Play est une marque commerciale de Google LLC.*



# Plus de liberté

Notre système d'assise électrique le plus performant, le CorpusMD, vous offre maintenant plus d'options de positionnement. La stabilité améliorée de la nouvelle gamme M-Series vous permet d'optimiser votre repositionnement, votre portée fonctionnelle et votre position de conduite pour une plus grande liberté de mouvement.

Jusqu'à 5,1 km/h de  
vitesse avec élévation  
du siège

Système de suspension  
complet à toute élévation,  
position ou vitesse







Inclinaison électrique de **180°** et basculement vers l'arrière de **50°**

Repose-jambes s'élevant de **90° à 180°**

9:41

Seating

To save a seated or relaxed position, move your seat to the desired position and press the corresponding button. The slider will then indicate which position you are currently closer to.

Your current position

Position 1

Position 2

**Tilt**  
Pos 1: 5°   Pos 2: 35°   **35°**

**Recline**  
Pos 1: 95°   Pos 2: 115°   **115°**

**Legrest**  
Pos 1: 95°   Pos 2: 135°   **135°**

**Elevation**  
Pos 1: 1"   Pos 2: 0"   **0"**

88 seat adjustments today  
Last 7 days average is 68

Learn about the seat functions



MyPermobil

Suivi des réglages et des fonctionnalités de l'assise en temps réel



# Portée accrue

Les fonctions ActiveHeight<sup>MC</sup> et ActiveReach<sup>MC</sup> travaillent ensemble pour améliorer votre portée dans tous les environnements. Ce fauteuil muni d'un élévateur d'assise avec bascule vers l'avant intégrée est le plus novateur, pratique et stable sur le marché.

|                       | M3  | M5  |
|-----------------------|-----|-----|
| ↑ <b>ActiveHeight</b> | 12" | 14" |
| ↶ <b>ActiveReach</b>  | 20° | 20° |

Fonction ActiveReach à 10° offert sans frais avec ActiveHeight



L'élévateur d'assise utilise 3 points de contact et recule l'assise de 3.5" pendant la montée pour assurer une très grande stabilité

12"



# Rien n'est impossible

Les suspensions FlexLink<sup>MC</sup> et FlexLink Pro<sup>MC</sup> offrent une stabilité, une traction et un confort de roulement accrus pour une performance optimale et une réduction des vibrations. Optimisée par le fabricant, la suspension réglable s'adapte à vos besoins et à votre environnement. Lorsque vous partirez à l'aventure, vous pourrez compter sur les lumières à DEL à haute puissance pour éclairer votre chemin.



FlexLink  
M3 Corpus



FlexLink Pro  
M5 Corpus

Lumières à DEL deux fois plus puissantes pour un éclairage efficace et une visibilité accrue





# M3 Corpus

Fabriqué avec soin pour vous offrir un meilleur positionnement, vous donner un sentiment de sécurité et réduire la fatigue de conduite, ce fauteuil vous permet d’accomplir facilement toutes vos tâches quotidiennes. Sa base compacte offre une grande maniabilité dans les espaces restreints sans faire de compromis sur la performance. La géométrie de suspension FlexLink unique et les roulettes indépendantes à bras pivotants vous aident à demeurer stable et en contrôle tandis que vous contournez les obstacles sur votre chemin.



# M5 Corpus

Roulez à toute allure grâce à des moteurs haute performance capables d’atteindre une vitesse de pointe de 12 km/h et de fournir un couple exceptionnel à bas régime qui vous permet de pivoter facilement. Profitez d’une stabilité et d’un confort de roulement inégalés grâce à la suspension indépendante FlexLink Pro. Le fauteuil M5 Corpus vous permet d’atteindre de nouveaux sommets grâce à sa stabilité accrue et à sa suspension complète même lorsque l’assise est à plus de 14” de hauteur.





# Accessoires BodiLink pour le système Corpus


Spécialement conçus pour le système d'assise Corpus, les accessoires BodiLink sont dotés la fine pointe de la technologie. Ils vous soutiennent véritablement en fonction de votre morphologie tout en vous offrant des réglages précis et un confort accru pour répondre à vos besoins de positionnement.

**Support de tête—**  
Charnière à piano facile à régler et raccord réduit double pour une résistance maximale


**Cale-tronc latéral—**  
Conçu pour un confort et un alignement du tronc accrus avec renvoi d'angle orientable réglable permettant au coussin de s'adapter à la forme du corp

**Cale-cuisse latéral—**  
Se positionne facilement le long du rail UniTrack, est muni d'un coussin pivotant à 360° et d'un levier à dégagement rapide convivial

## Options de garnitures

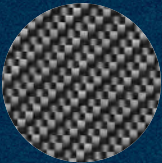

Carbon Fiber

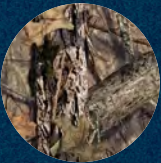

Mossy Oak® Breakup® Country™



Water Lily



Fireball



CDG Poly

Midnight

Arctic

Violet

Sky

Aqua

Spring

Canary

Sunset

Chili

Flamingo

Platinum

Bronze

Gold

*Remarque: Les couleurs réelles du produit peuvent varier des couleurs montrées.*





Ce petit coffre redessiné est la solution de rangement par excellence

Muni de parois intérieures lisses, il offre un grand espace de rangement tout en étant suffisamment étroit

## Spécifications

|                                     | M3 Corpus                                                                   | M5 Corpus                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Poids maximum de l'utilisateur      | 330 lb                                                                      | 330 lb                                                                      |
| Vitesse maximum                     | 6 mph                                                                       | 7.5 mph                                                                     |
| Autonomie                           | 16 mi (Grp 34s)   20 mi (Grp 24s)*                                          | 20 mi*                                                                      |
| Largeur de châssis                  | 24"                                                                         | 25"                                                                         |
| Longueur de châssis                 | 35.5"                                                                       | 37.5"                                                                       |
| Rayon de giration                   | 20.5"                                                                       | 21.5"                                                                       |
| Franchissement des obstacles        | 3"                                                                          | 3"                                                                          |
| Type de batterie recommandé         | Group 34 ou 24                                                              | Group 24                                                                    |
| Poids avec batteries                | 385 lb (Grp 34)   405 lb (Grp 24)                                           | 423 lb (Grp 24)                                                             |
| Electronique R-net                  | R-net 120A                                                                  | R-net 120A                                                                  |
| Hauteur sol-siège                   | 17.5", 18.5", 19.5"                                                         | 17.5", 18.5", 19.5"                                                         |
| Élévation du siège                  | Optionnel 12"                                                               | Optionnel 14"                                                               |
| Roue motrice                        | 14"                                                                         | 14"                                                                         |
| Roulettes                           | 7"                                                                          | 8"                                                                          |
| Options d'inclinaison               | Déclive: 0° – 50°<br>ActiveReach (proclive): 5°, 10° & 20° (jusqu'à 300 lb) | Déclive: 0° – 50°<br>ActiveReach (proclive): 5°, 10° & 20° (jusqu'à 300 lb) |
| Réglage électrique du repose-jambes | 85° – 180°                                                                  | 85° – 180°                                                                  |
| Inclinaison électrique du dossier   | 85° – 180°                                                                  | 85° – 180°                                                                  |
| Hauteur du dossier                  | 20", 23" – 28" (1" incr.)                                                   | 20", 23" – 28" (1" incr.)                                                   |
| Profondeur de l'assise              | 14" – 22" (1" incr.)                                                        | 14" – 22" (1" incr.)                                                        |
| Largeur de l'assise                 | 17" – 23" (2" incr.)                                                        | 17" – 23" (2" incr.)                                                        |
| Longueurs des accoudoirs            | 10", 13", 16", 18"                                                          | 10", 13", 16", 18"                                                          |

\*L'autonomie réelle varie en fonction des conditions de conduite et de la batterie.

Les spécifications peuvent varier selon la configuration. Veuillez lire les avertissements et les instructions du manuel du propriétaire sur l'utilisation sécuritaire de votre fauteuil roulant dans diverses conditions de conduite. Les poids du fauteuil sont approximatifs et incluent la base, les batteries, les fonctions du siège électrique et le système d'assise sans accessoires.