

Permobil

F5 Corpus[®]



permobil

Overall even behendig

De F5 Corpus® is ideaal voor een actieve levensstijl buitenshuis en voor regelmatig rijden op wisselende ondergronden of over langere afstanden. Met zijn kleine draaicirkel biedt hij een opmerkelijke wendbaarheid.

Corpus® – volgt de contouren van het lichaam

Het Corpus®-zitsysteem heeft een ergonomisch ontwerp dat de contouren van het lichaam volgt. Een verbetering van het comfort, de bekkenpositionering, de laterale stabiliteit en opname in het kussen zijn stuk voor stuk belangrijke doelstellingen van de nieuwe Corpus-kussens.

Corpus-kussens zijn voorzien van zachter schuim met een dubbele dichtheid op de rugleuning, een nieuw ontworpen bekkenbodem en Stretch-Air™, een ademende, waterbestendige kussenstof die in de machine kan worden gewassen op 60 °C.

Active Reach

Kantelt de zitting tot maximaal 45° naar voren en verhoogt deze om het functionele bereik, de ondersteuning bij transfers en uw dagelijkse activiteiten te vergroten.

Active Height


Biedt u de mogelijkheid om tot 5 km/uur te rijden met de zitlift op volledige hoogte en combineert dit naadloos met *Active Reach* om u het ultieme voordeel te geven bij het betreden van uw omgeving.

Elektrische rughoekverstelling

Soepele en veilige elektrische rughoekverstelling met naadloze schuifkracht-reductie voor elke gebruiker tot 150 kg.

Programmeren vereenvoudigd

QuickConfig is een nieuwe, innovatieve app voor service-monteurs, adviseurs en therapeuten, die het eenvoudiger maakt om parameters in te stellen en een intuïtieve interface biedt om de F5 Corpus af te stellen op basis van de door u gewenste rij- en zitkenmerken.

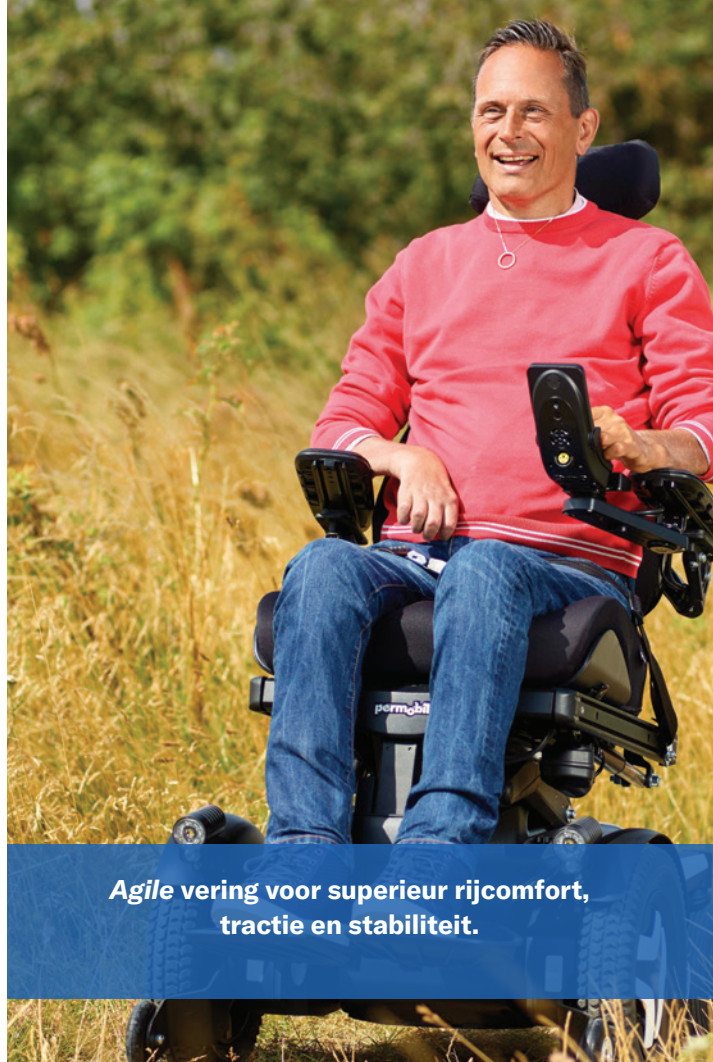

Agile vering voor superieur rijcomfort, tractie en stabiliteit.



De elektrische rughoekverstelling met naadloze schuifkracht-reductie

F5 Corpus[®] Specificaties

Personaliseer uw rolwagen

SKY

VIOLET

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATINUM

FLAMINGO

Maximalsnelheid	12 km/uur
Actieradius (G24: 85 Ah accu's)	40 km*
Maximaal gebruikersgewicht	150 kg
Max. obstakelhoogte (met opgaande beweging)	65 mm (75 mm)
Min. draaicirkel	1490 mm
Draaien in gang	1200 mm
Vering	Onafhankelijk op alle wielen
R-net elektronisch Power Platform	120 A
Breedte incl. zitting	650–790 mm
Hoogte	970–1170 mm
Minimale transportlengte	955 mm
Min. transporthoogte (ingeklapte rugleuning)	825 mm
Gewicht incl. accu's 85 Ah	189 kg
Gewicht van accu's 85 Ah	2x23 kg
Zithoogte (met elektrische stoellift)	450–800 mm
Zitdiepte	370–570 mm (per 25 mm)
Zitbreedte	420 – 570 mm (door 50 mm)
Rugleuningbreedte	360/410/460/510 mm
Hoogte rugleuning	470, 545-670 mm (door 25 mm)
Afstand tussen armleuningen	380–480/480–580 mm



Zitlift
Active Height 0-350 mm



Voorwaartse
kantelverstelling
Active Reach 5-45°*
Voor 20° tot 45° is een
VS-beensteun nodig



Elektrische en manuele
Beensteun **90–180°**



Elektrische rugverstelling **85–180°**
Manuele rugverstelling **120°**



Achterwaartse
kantelverstelling **0- 50°**



*Rijomstandigheden en keuze van het accutype.

De afmetingen zijn bij benadering en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



De volledig onafhankelijke
en Agile vering is met
name **geschikt voor
actief buitenrijden.**

Permobil

F5 Corpus[®]

Geniet van superieure
trillingsdemping, rijcomfort en
rijprestaties. *Active Reach* en
Active Height worden naadloos
gecombineerd om uw wereld
binnen handbereik te brengen.

De F5 Corpus is een geweldige
hybride voor gebruik binnen-
of buitenshuis.

permobil

permobil.nl



F5CORPUSDATASHEETNL230818