

Power Assist

# SmartDrive MX2+



permobil

# Extra drivkraft när det behövs

SmartDrive gör det möjligt för dig att ha en mer aktiv livsstil – den kompletterar den energi du normalt skulle behöva använda. Med en enkel knapptryckning eller rörelseaktivering kan du få extra kraft när och där du behöver den som bäst.

SmartDrive är ett lätt drivaggregat för manuella rullstolar som hjälper dig att ta dig uppför sluttningar och ramper, över tjocka mattor, långa sträckor och i princip överallt där det är svårt att köra.

Att köra rullstol kan slita på axlarna och orsaka allvarliga problem i framtiden. Med SmartDrive minskar du antalet tag du tar och minimerar repetitiva rörelser. Den hjälper till att skydda axlarna från slitage som orsakas av långvarig och repetitiv framdrivning av rullstol och minskar risken för förslitningsskador på armbågar och handleder.

SmartDrive är enkel och intuitiv att använda och matchas med valfri styrning: PushTracker E3, SwitchControl, SpeedControl Dial eller Apple Watch.





## SpeedControl Dial

Ergonomiskt utformad för att passa alla manuella rullstolar. Kom igång på bara några minuter med SpeedControls enkla installation och förkonfigurerade inställningar.

Lysdioder för att enkelt se när SpeedControl är aktiverat

Monteras direkt på ramen

Förlängt fäste som tillval för ökad justerbarhet

Förstärkt kabel för extra hållbarhet

## SwitchControl

SwitchControl är ett enkelt sätt att styra din SmartDrive med en knapptryckning. Du kan använda SwitchControl i tillfälligt eller kontinuerligt läge och eventuellt ansluta en extern brytare via monouttag som tillval.

### Tillfälligt läge

Din SmartDrive är igång så länge du håller in någon av knapparna.

### Kontinuerligt läge

Håll någon av knapparna intryckt för att ställa in hastigheten. När du vill stanna trycker du bara på knappen och håller fast i hjulen.

### SwitchControl med tillvalet monouttag

Använd ett externt monouttag för att styra SwitchControl, ingen programmering krävs.



SwitchControl monterad på ramen




## PushTracker E3

**PushTracker E3 har en uppgraderad processor och förbättrad batteriprestanda.**

- Förinstallerade appar innebär enkel installation på några minuter
- Pekskärmsteknik
- Längre batterilivslängd
- Slitstark och vattentät
- Mer responsiv och effektiv

För mer information

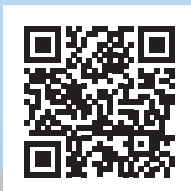

## Apple Watch

**Du kan nu använda Apple Watch (serie 5 eller senare) för att styra din SmartDrive MX2+.**

- Snabb och enkel installation
- Se avstånd och batterinivåer i din Apple Watch
- Överlägsen batteriprestanda
- Gratis app från App Store

# Mer kraft – på ditt sätt

| Parkopplad med valfri styrning               | SpeedControl Dial                                                                 | SwitchControl                                                                     | SwitchControl monouttag                                                           | PushTracker E3 Basic                                                               | PushTracker E3                                                                      | Apple Watch                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |  |  |  |  |  |  |
| Tillhandahålls av Permobil                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| Trådbundet alternativ                        | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| PushTracker                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Förinstallerad                                                                     | Full SmartWatch                                                                     | Full SmartWatch                                                                     |
| Plug & play                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Inställning klar på 5 min                    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Programmerbar inställning                    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Ingen laddning krävs                         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Fungerar med SpeedControl                    | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Fungerar med SwitchControl                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Fungerar med monouttag för SwitchControl     |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Inget wifi krävs                             | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Öka eller minska hastigheten utan att stanna | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

