


Introductie van

Power Platform en QuickConfig

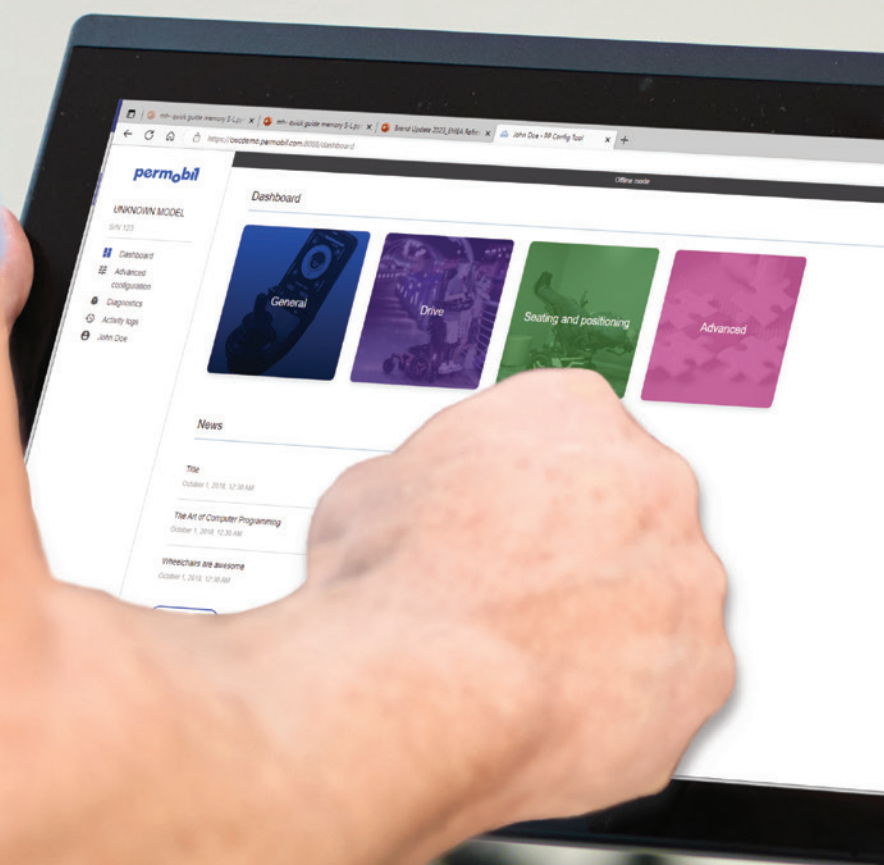

Instellen en onderhoud vereenvoudigen

Permobil introduceert QuickConfig en Power Platform - een software en elektronisch besturingssysteem dat het instellen van parameters en service eenvoudig maakt voor elektrische rolstoelen van Permobil*.

Programmeren vereenvoudigd

QuickConfig is een app die is ontworpen voor onderhoudstechnici, klinici en zorgverleners en die een eenvoudigere manier biedt om parameters te configureren met een moderne interface om de elektrische rolstoel van Permobil in te stellen met de rij- en zittenmerken en stavolgorde die de gebruiker verkiest.

QuickConfig en Power Platform combineren de vier huidige tools voor het instellen van parameters in één eenvoudige app die intuïtief en gebruiksvriendelijk is. Hierdoor kunnen servicetechnici de meest voorkomende parameterinstellingen met één druk op de knop uitvoeren, wat tijd bespaart en zorgt voor een optimale gebruikersinstelling.

Het dashboard geeft je toegang tot snelle handleidingen die je helpen bij het instellen van de meest voorkomende parameterinstellingen. Geavanceerde instellingsparameters zijn beschikbaar en kunnen worden gewijzigd met absolute waarden.

Met de geïntegreerde webserver van Power Platform kan de rolstoel worden ingesteld zonder dat er WiFi beschikbaar is. En zodra de rolstoel is aangesloten, ontvangt hij draadloze firmware-updates die zorgen voor de nieuwste functionaliteit.

Service vereenvoudigd

Met minder onderdelen en realtime inzichten zorgt Power Platform voor efficiëntere diagnoses en kortere servicetijden. Het vereenvoudigt niet alleen de elektronica van de elektrische rolstoel, maar maakt het ook mogelijk om reparatieonderdelen snel te programmeren op basis van de opgeslagen instellingen van je rolstoel in de app.

Stel je voorkeurszitposities in met de nieuwe joystick

Individuele stoelgeheugenfuncties blijven beschikbaar in de joystick en stellen gebruikers in staat om hun favoriete stoelposities in te stellen. Intuïtieve pictogrammen maken het gemakkelijk om maximaal zes geheugenfuncties op te slaan. Om toegang te krijgen tot realtime zitplaatsinformatie, schatting van de actieradius, afgelegde afstand en meer, raden we gebruikers aan onze gratis MyPermobil App te downloaden.

*Power Platform en QuickConfig is beschikbaar op geselecteerde elektrische rolstoelmodellen van Permobil. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger voor meer informatie.



BoB



Je kunt de positie instellen en gegevens naar de stoel sturen met onze nieuwe functie Biomechanics of Bodies, ook bekend als BoB.





Training en certificering

Er is een gecertificeerd trainingsprogramma beschikbaar via Permobil Academy. Training op aanvraag kan worden geregeld met uw lokale Permobil-vertegenwoordiger.

Meer informatie over Permobil Academy:



QuickConfig app beschikbaar
in Google Play en AppStore.



Volg de richtlijnen in de app om je account in te stellen.

