

Dispositivo di propulsione elettrico

SmartDrive MX2+



permobil

Ausilio al movimento

SmartDrive potenzia il tuo stile di vita attivo. Integra l'energia che normalmente dovresti utilizzare. Con un solo pulsante, tocco o gesto è possibile ottenere un'accelerazione maggiore quando e dove serve.

SmartDrive è un dispositivo di propulsione elettrico leggero per carrozzine manuali che consente di spostarsi in salita e su rampe, su tappeti spessi, lunghe distanze ed, essenzialmente, ovunque sia difficile spingersi.

Spingere una carrozzina manuale può mettere a dura prova le spalle e causare gravi problemi futuri. È stato dimostrato che l'ausilio elettrico SmartDrive riduce le spinte e minimizza lo stress ripetitivo. Aiuta a proteggere le spalle dall'usura causata da una propulsione ripetitiva e prolungata e riduce il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI, repetitive strain injury) su gomiti e polsi.

SmartDrive è semplice e intuitivo da usare in abbinamento al tipo di controllo scelto: PushTracker E3, SwitchControl, SpeedControl Dial o Apple Watch.

Facilmente rimovibile,
quindi ideale per il trasporto

Compatibile con quasi
tutte le carrozzine
manuali con telaio
rigido o pieghevole.

Maniglia ergonomica per
agevolare le operazioni di
aggancio/sgancio.

Peso ridotto:
soli 5,7 kg

Varie opzioni di
controllo della
propulsione.

Il design brevettato di
OmniWheel si innesta e rimane
innestato in qualsiasi posizione,
mantiene una trazione ottimale
e sale fino al 17% in pendenza





LED per vedere facilmente quando lo SpeedControl è attivato

Si monta direttamente sul telaio

Montaggio con estensione per una maggiore possibilità di regolazione

Cavo rinforzato per una maggiore durata

SpeedControl Dial

Progettato ergonomicamente per adattarsi a tutte le carrozzine manuali. Installazione semplice e veloce grazie alle impostazioni preconfigurate di SpeedControl.

SwitchControl

Lo SwitchControl è un modo semplice per controllare lo SmartDrive, basta premere un pulsante. È possibile utilizzare lo SwitchControl in modalità momentanea o bloccata e, facoltativamente, collegare un interruttore esterno con un'opzione jack mono personalizzata.

Momentaneo


Lo SmartDrive resterà attivo finché viene mantenuto premuto uno dei pulsanti.

Bloccato

Tenere premuto uno dei due pulsanti per impostare la velocità di crociera. Quando vuoi fermarti, semplicemente, tocca il pulsante e frena tramite i corrimano.

SwitchControl con opzione jack mono

Utilizzare qualsiasi interruttore jack mono esterno per azionare lo SwitchControl, non è necessaria alcuna programmazione.

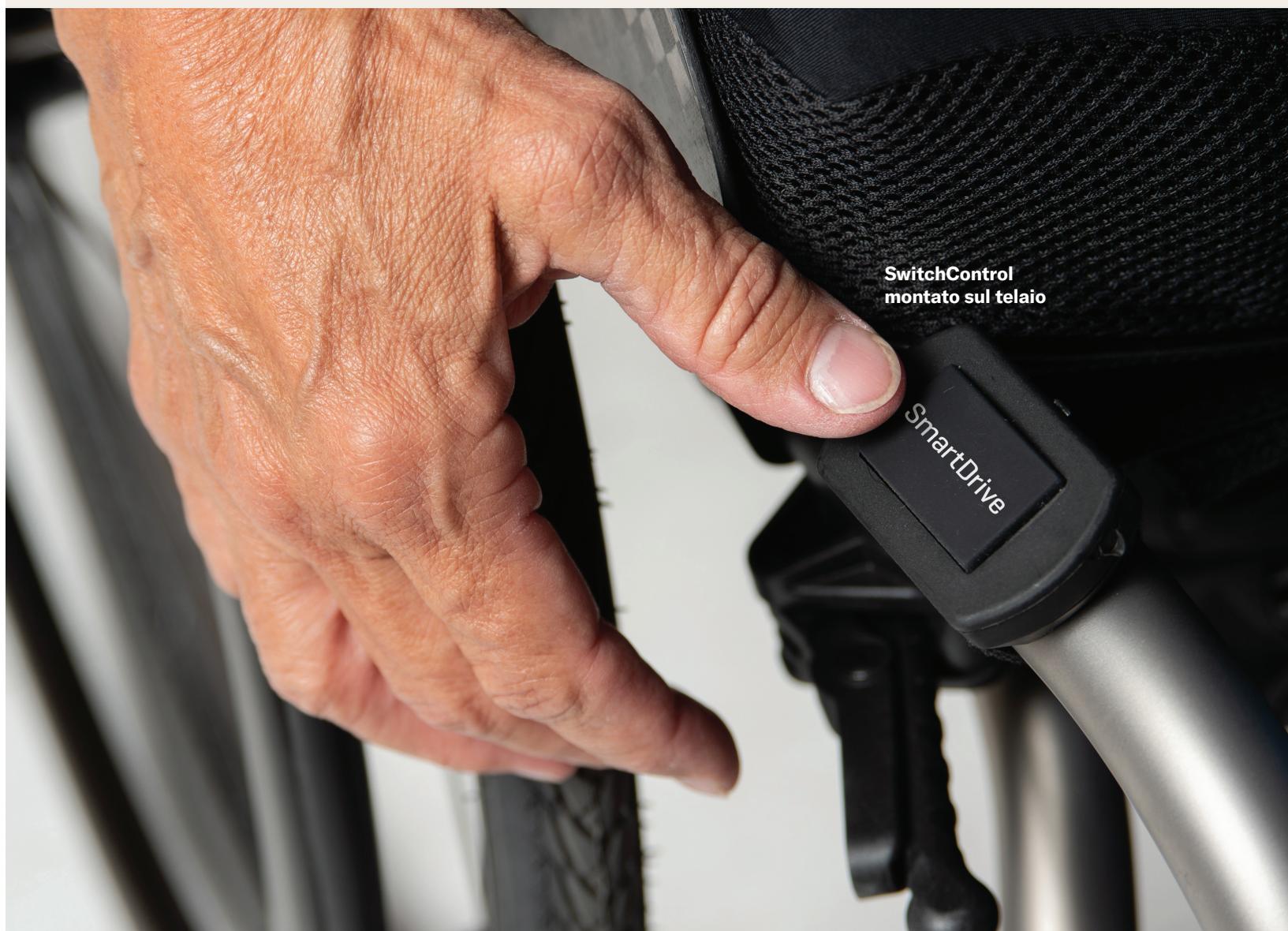



PushTracker E3

PushTracker E3 ha un processore aggiornato e prestazioni della batteria migliorate.

- App precaricate per una facile configurazione in pochi minuti
- Tecnologia touch screen
- Maggiore durata della batteria
- Durevole e impermeabile
- Più reattivo ed efficiente





Apple Watch

Ora è possibile utilizzare l'Apple Watch (serie 5 o successive) per controllare il proprio SmartDrive MX2+.

- Configurazione semplice e rapida
- Traccia le distanze e i livelli di batteria dal tuo Apple Watch
- Batteria con le prestazioni migliori.
- App gratuita dall'App Store

Apple Watch e App Store sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Dai energia alla tua spinta

	SpeedControl Dial	SwitchControl	SwitchControl jack mono	PushTracker E3 Basic	PushTracker E3	Apple Watch
						
Fornito da Permobil	✓	✓	✓	✓	✓	
Collegamento via cavo	✓	✓	✓			
PushTracker				Preinstallato	Full SmartWatch	Full SmartWatch
Plug & Play	✓	✓	✓	✓		
Installazione in 5 min	✓	✓	✓	✓		
Impostazioni programmabili	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nessuna ricarica necessaria	✓	✓	✓			
Funziona con lo SpeedControl Dial	✓			✓	✓	✓
Funziona con lo SwitchControl		✓		✓	✓	✓
Funziona con lo SwitchControl + jack mono			✓	✓	✓	✓
Wi-Fi non necessario	✓	✓				
Aumentare o diminuire le velocità senza fermarsi	✓					

