



M1

+

Elfunktioner
Elektrisk sitslutning
Elektrisk
ryggstödslutning
Elektriskt benstöd

+

Ryggstöd
Comfort Acta-Back
Comfort Acta-Relief
ROHO Agility Max
Skålformad solid rygg

Rätt val för vardagen

En pålitlig och hållbar elrullstol från Permobil

permobil

Innovating for individuals

Vi slutar aldrig att vara innovativa

Permobil grundades för att förbättra livet för människor med rörelsehinder – och samma passion finns fortfarande hos alla med en koppling till vår organisation.

Idag använder vi den senaste tekniken och datan samtidigt som vi samarbetar nära med kliniker och användare för att utveckla, utforma och tillverka banbrytande lösningar. Som ett internationellt företag med försäljning, service, distribution och tillverkning över hela världen betjänar vi en global grupp användare – och gör allt vi kan för att stödja deras förmågor.



Varför nöja sig med det näst bästa? Nöj dig med M1

Permobil's högkvalitativa elrullstolar med höga prestanda är utformade för att uppfylla individuella livsstilskrav – och Permobil M1 är inget undantag.

Den mitthjulsdrivna elrullstolen har smidig fjädring, vilket gör den idealisk för användning både inomhus och utomhus. Den finns med ett urval av elektriska funktioner och en rad olika ryggstöd och stöd för att passa olika positioneringsbehov.

Konfigurera din M1

Vi har gjort det enkelt för dig att beställa M1 eller eventuella reservdelar som du kan behöva längre fram. Skanna QR-koden för orderformuläret.

- Välj funktioner
- Välj ryggstöd och stöd
- Beställ



Vi kallar det standardisering som är lätt att anpassa – en viktig del av innovation för individer. Användare kallar det bästa åkturen till bästa pris.

Fullt standardiserad – fullt anpassningsbar

Vi har introducerat en ny nivå av standardisering för att göra Permobil M1 tillgänglig för många användare på marknaden. Stolen levereras användningsklar och med de funktioner och ryggstöd som beställts. Med några enkla justeringar kan den anpassas efter individens behov. Eftersom M1 är mycket standardiserad är service och underhåll dessutom enkelt.

För att hjälpa dig att anpassa M1 efter dina användares behov har vi skapat en anpassningsguide online som är full av nyttiga videoklipp. Du hittar även grundläggande underhålls- och servicetips tillsammans med utbildnings- och servicemanualer.

M1: En bekväm och stabil åktur

Vi vet hur viktig en bekväm och stabil åktur är för användarna, och därför bygger vi in detta i alla våra elrullstolar. M1 har från grunden och upp utvecklats med tanke på praktisk användning varje dag – för det är vad användarna vill ha.


40

Kör upp till 40 km
på en laddning



Fortsätt längre

M1 drivs av samma tillförlitliga högprestandamotorer som används i alla Permobil's elrullstolar. Smidig acceleration och en topphastighet på 8 km/h innebär att användarna kan ta den snabba eller långsamma filen vart han eller hon än vill åka. Och eftersom M1 levereras som standard med Permobil's snabbbladdade batterier med hög kapacitet, kommer de att kunna ta sig dit och tillbaka utan att behöva oroa sig för att batterierna tar slut.

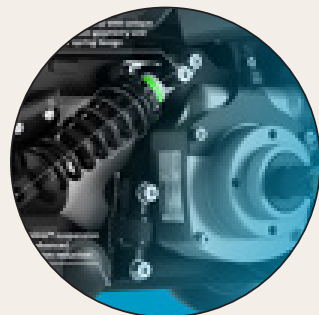

Komfort och stabilitet

För användare som gillar att vara utomhus i sina elrullstolar är rätt fjädring avgörande för en bekväm åktur över gupp och ojämnt underlag. M1:ans fjädring absorberar vibrationer från drivhjul och länkhjul för att säkerställa komfort och stabilitet oavsett terräng.



Intuitiv körning

Med mitthjulsdrivna stolar hamnar användaren i tyngdpunkten, vilket innebär att kroppens rörelser speglas när stolen rör sig. Detta ger en intuitiv åktur eftersom stolen följer den naturliga anatomiska rörelsen och möjliggör en snäv svängradie – idealiskt för att klara svängar i hemmet eller på andra mindre ytor inomhus. Dessutom ger de stöttande länkhjulen fram och bak överlägsen stabilitet även när man kör uppför branta lutningar.



Se och synas

Kraftfulla LED-lampor fram och bak gör att man alltid kan se vart man är på väg och att man är synlig för andra, oavsett om man kör på vägen eller trottoaren, i gryning, skymning eller nattetid.



Smidigare styrning med fullt grepp

Anti-vobbelsystemet säkerställer att alla sex hjulen har optimalt grepp och att vibrationer mellan hjul och stomme inte är något som användaren känner av. I slutändan är styrningen smidig och stolen går i den riktning som användaren önskar.



Det uppfällbara och
låsbara armstödet och det
undanfällbara benstödet
**gör vardagens förflyttningar
och aktiviteter säkrare
och enklare.**



Välja rätt funktioner

M1 erbjuder upp till tre olika elektriska funktioner som hjälper användaren att positionera och ändra ställning på ett enkelt sätt. Den här guiden hjälper dig att avgöra vad användaren behöver i sitt dagliga liv.

Guide över elektriska funktioner

Elektrisk ryggstödslutning

85°–130°



Elektrisk ryggstödslutning ändrar ryggstödet vinkel samtidigt som sitsen förblir i samma läge. När den används för sig kan elreglerad ryggstödslutning underlätta positionering för funktionella aktiviteter, balans, stabilitet och komfort. När elektrisk ryggstödslutning kombineras med elektriskt höjbara

benstöd kan den bidra till en omfördelning av trycket från sittytan. Men för att minimera risken för skjuvning och förlorad positionering bör den användas i kombination med elektrisk sitslutning.

Välj för att få

- Grundläggande tryckavlastning

Elektrisk sitslutning

0°–50°



Elektrisk sitslutning ändrar hela kroppens vinkel utan att höftvinkeln ändras. Elektrisk sitslutning har en primär roll i omfördelning av trycket från sittytan. Elektrisk sitslutning kan även användas för balans, stabilitet, lindring av smärta och

obekvämlighet samt hantering av urinblåsa och för rullstolsfärdigheter som att ta sig fram över trottoarkanter och i lutningar.

Välj för att få

- Tryckavlastning
- Postural stabilitet
- Förbättrad sitttolerans



Elektriskt benstöd

90°–150°



Elektriskt höjbara benstöd höjer och sänker benen genom att ändra knävinkeln. Elektriskt höjbara benstöd hjälper till att hantera ödem i de nedre extremiteterna i kombination med sitslutning eller sits- och ryggstödslutning. Användning av elektriskt höjbara benstöd kan bidra till att minska

obekvämlighet när man sitter i en elrullstol. Dessutom kan höjbara benstöd användas vid rörelsebegränsningar av leder orsakade av sammandragningar.

Välj för att få

- Minskning av ödem
- Förbättrad cirkulation
- Smärtlindring

Elektrisk ryggstödslutning, sitslutning och benstöd

85°–180°



När flera elektriska sitsfunktioner kombineras omfördelningen av trycket bort från sittytan. Obekvämlighet på grund av sittande kan också minimeras genom användning av flera elektriska sitsfunktioner. Elektrisk sitslutning, ryggstödslutning och höjbara benstöd kan tillsammans även hjälpa andningen

samt hantering av urinblåsa och spasticitet. Om sitslutning kombineras med ryggstödslutning kan även den posturala stabiliteten förbättras.

Välj för att få

- Överlägsen tryckavlastning
- Andning
- Smärtlindring
- Minskning av ödem
- Hantering av urinblåsa
- Hantering av spasticitet

Välja rätt ryggstöd

Att välja rätt ryggstöd kan innebära stor skillnad för användaren. Det påverkar hans eller hennes komfort, positionering och helhetsupplevelse i stolen. Därför finns det flera olika ryggstöd och stöd till M1. Den här guiden hjälper dig att välja det optimala ryggstödet för en individ.



Ryggstödsguide

Acta-Back

Acta-Back är ett fullt justerbart och anpassningsbart ryggstöd. Formbara stag ger kontinuerligt stöd vid förändrade förhållanden.



Välj när

Användaren behöver bålstöd i sidled och vill ha ett ryggstöd som formar sig efter kroppen, oavsett hur mycket han eller hon använder stolen.

Stöd



BodiLink nackstöd



BodiLink bålstöd

Acta-Relief

Acta-Relief är ett mycket anpassningsbart ryggstöd, tack vare det prisbelönta BOA Fit-systemet. Ryggstödet medger omslutning genom att skalet skapar ett jämnt tryck längs hela ryggen. Det har ett mikrojusterbart reglage, superstarka lättviktssnören samt snörstyrningar med låg friktion.



Välj när

En användare har ryggradsdeformiteter eller behöver komfort och stöd för nedre och övre bröstkorgen, oavsett hur mycket han eller hon använder stolen.

Stöd



BodiLink nackstöd



BodiLink bålstöd

Permobil skålformad solid rygg

M1 levereras som standard med Permobil skålformad solid rygg. Det enkla plana ryggstödet har en standardskumdyna som ryggstöd.



Välj när

En användare endast använder stolen för mobilitet och inte behöver stöd för kroppen bakåt eller i sidled.

Stöd



Permobil Original nackstöd

ROHO® AGILITY® Max


Ryggstödet ROHO AGILITY Max ger ett betydande stöd och kontroll för bälen både bakåt och i sidled för optimal hållning och stabilitet. Vinkel, höjd och djup kan justeras medan användaren sitter i rullstolen – med ett enda verktyg. Tack vare de slitstarka kompositmaterialen hålls det alltid på plats.



Välj när

En användare behöver posturalt och djupt bålstöd i mitten av bröstkorgen, oavsett hur mycket han eller hon använder stolen.

Stöd

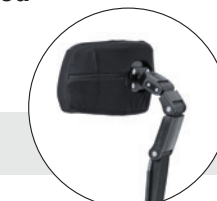

Permobil Original nackstöd



BodiLink nackstödsfäste + Permobil-kudde

M1 Specifikationer

Max hastighet	8 km/h (6 km/h som tillval)
Räckvidd (G34: 65 Ah-batterier)	40 km*
Användarens maxvikt	136 kg
Hindertagning (med upprampning)	50 (75 mm)
Minsta vänddiameter	1120 mm
Vändutrymme	1100 mm
Fjädring	Smooth
Elektronik	VR2 90 A (tillval R-net 90 A)
Bredd inkl. sits	610–790 mm
Höjd	970–1170 mm
Förvaringslängd/-höjd	670 mm/820 mm
Vikt inkl. 65 Ah-batterier	144 kg
Höjd sits till golv (exkl. dyna)	410 mm
Valbara höjder sits till golv (exkl. dyna)	410 mm; 435 mm; 460 mm
Bredd sits och ryggstöd**	360–560 mm (steg om 50 mm)
Sitsdjup	360–560 mm (steg om 25 mm)
Ryggstödet höjd (exkl. sittdyna) sitsbredd 360 mm	455–640 mm (steg om 25 mm)
Ryggstödet höjd (exkl. sittdyna) sitsbredd >360 mm	555–740 mm (steg om 25 mm)
Armstödshöjd	180–360 mm
Avstånd mellan armstöd	380–480/480–580 mm
Justering av ryggstödsvinkel (manuell)	85°–110°
Sitsplansjustering - lutning framåt/bakåt	90° till 140°
Krocktest ISO 7176-19 - 4-punktsfäste	Ja – max. användarvikt 136 kg
Testad enligt SS-EN12182/SS-EN12184 CE	Ja

*Körförhållanden och val av batterityp.
**Ryggstödsram.
Måtten är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.



Tillval
Acta Back
Acta Relief
ROHO Agility Max
Skålformad
solid rygg

Anpassa din elrullstol

- SUNBURST ORANGE
- RADIANT RED
- POWER PINK
- GALACTIC GREEN
- OCEAN BLUE
- MIDNIGHT BLACK





Det har aldrig varit enklare att beställa en Permobil

För att fylla i orderformulär skannar du bara
QR-koden eller besöker permobil.se