

ROHO®

Hybrid Select dyna

Exceptionell positionering
med beprövat hudskydd.

permobil



Avancerad hybrid-dyna med optimerade positioneringsegenskaper

Hybrid Selects yta för bäckenet anpassar sig efter användarens unika form, vikt och positionsändringar. ROHO®-luftinlägget i 3 zoner med IT-luftinlägg är utrustat med ISOFLO® Memory Control som gör det möjligt att hitta och ställa in rätt position varje gång.



Tre zoner med ISOFLO Memory Control®
för justerbar positionering

Kännetecken optimerat sittande



Hudskydd

Mekaniska tester

Nedsänkningstest (ISO 16840-2) visar hur djupt kroppen sjunker in i dynan.

Test av omslutande stöd (ISO 16840-12) visar hur kroppsvikten bärs upp av dynan genom omslutning eller avlastning.

Skjuvtest (skjuvkraftssensor) visar i vilken utsträckning dynan interagerar med kroppen och deformerar vävnad.

Tryckmätning visar hur trycket fördelas mellan sittstödet och användaren.




Positionering

Test av glidmotstånd (ISO 16840-2) visar hur mycket kraft som krävs för att användaren ska glida framåt på dynan.



Stabilitet

Lateralt lutningstest (ISO 16840-13) visar dynans stabilitet vid lutning i sidled.

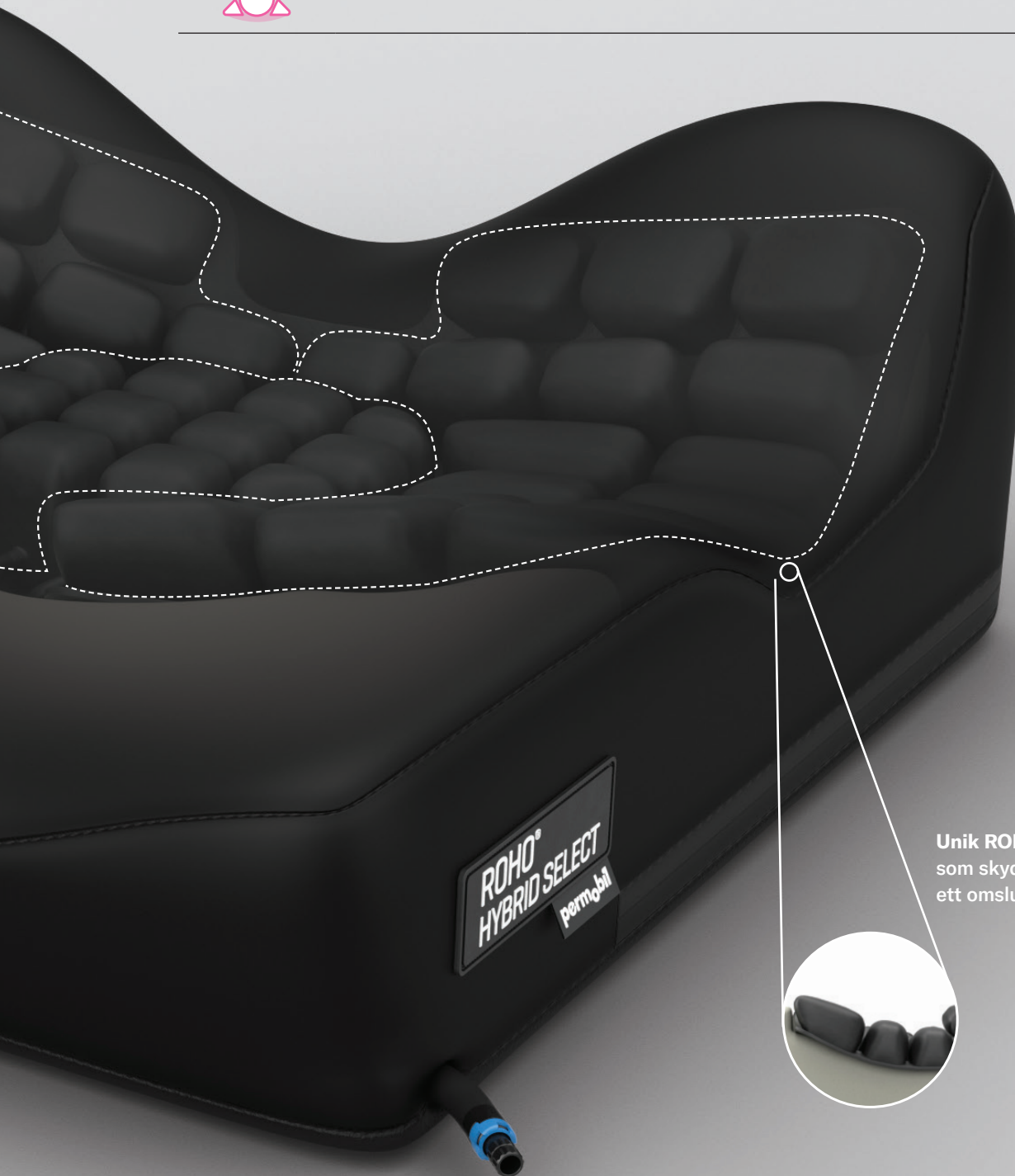


Unik ROHO-celldesign
som skyddar huden och ger
ett omslutande stöd

Bäckenstöd med patenterad ROHO® DRY FLOATATION®-teknik för viktfordelning och 3,2 cm nedsänkning.

Skålade och konturerade benstöd

Unik sidostabilitet

Hybrid Selects innovativa design är utformad med god positioneringsförmåga genom en konturerad dyna i tåligt skum och skålade benstöd som stöttar, ger stabilitet i sidled och avlastar svanskotan/svansbenet.

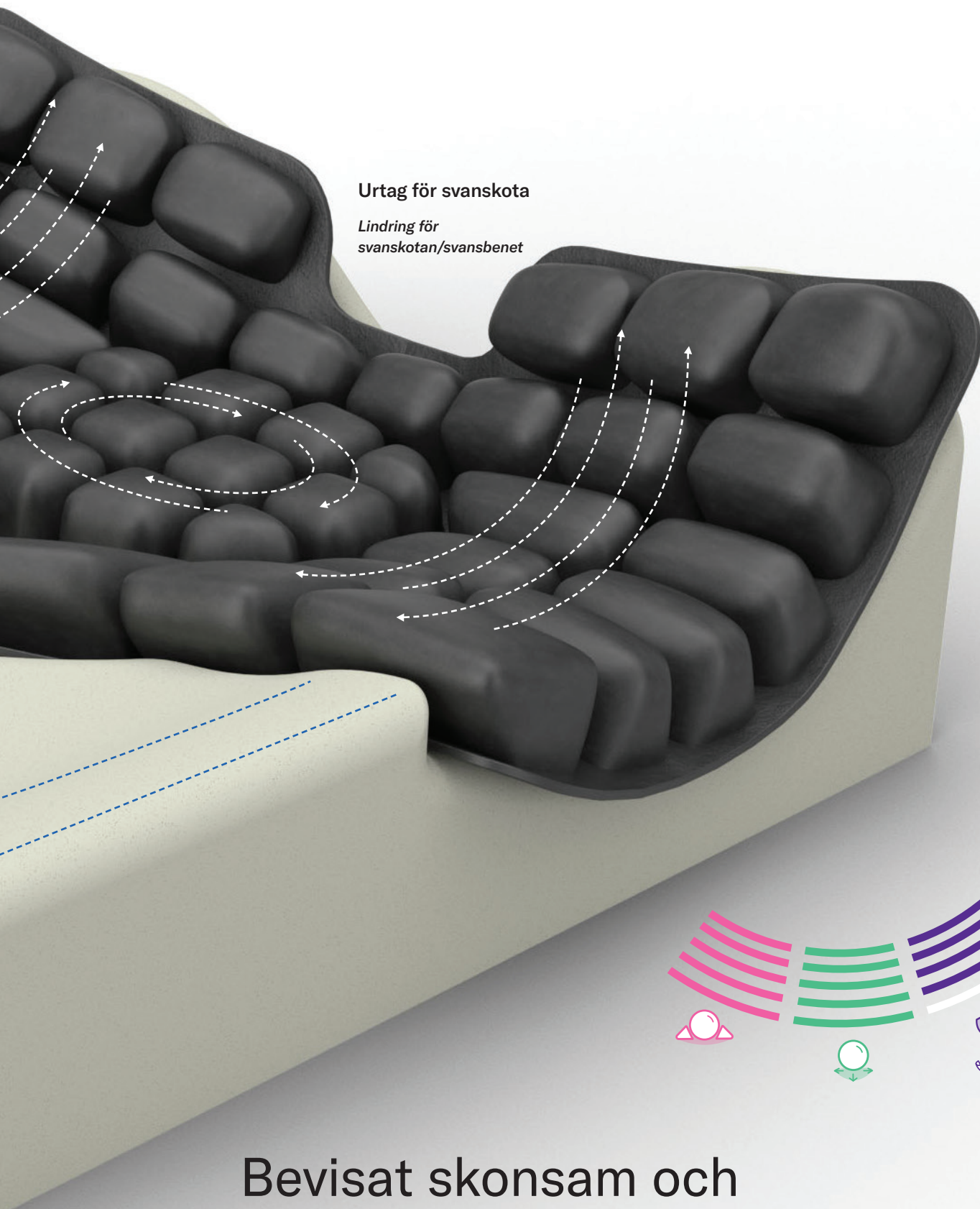

Urtag för svanskota

Lindring för
svanskotan/svansbenet



Bevisat skonsam och skyddande för huden

Med Hybrid Select får du en verkligt funktionell stabilitet kombinerat med en konstruktion och material som ger ett mycket bra skydd för hud och mjukvävnad. Hybrid Select-dynans konturerade design gör att bäckenet omsluts av luftfyllda celler som formas och anpassas efter kroppens rörelser och skyddar hud och mjukvävnad.



Hudskydd



Positionering



Stabilitet



Nedsänkning



Omslutning



Avlastning

Extra avlastningsalternativ i standardutförandet

Hybrid Select är mer flexibel och anpassningsbar än många andra tryckavlastande dynor och underlättar positioneringen till rätt läge – varje gång. Hybrid Select är även konstruerad med ett borttagbart IT-luftinlägg för extra avlastning under sittknölna.



Avlastning

*Borttagbart luftfyllt inlägg
för extra avlastning
under sittknölna*



Hybrid Select
ger mig det positionerings-
stöd jag behöver och gör
det enklare för mig att
förflytta mig.

— Eric
Permobil-användare



Specifikationer

Överdrag	Stretch-Air®
Produktvikt	1,45 kg*
Viktgräns:	227 kg
Garantivillkor för dyna	36 månaders begränsad garanti
Garantivillkor för överdrag	6 månaders begränsad garanti

*Produktvikten baseras på en dyna i storlek 40,5 x 40,5. Produktens vikt varierar beroende på dynans storlek.

Storlekar

35,5 cm x 37,5 cm	40,5 cm x 42,5 cm	43,0 cm x 47,5 cm	51,0 cm x 42,5 cm
35,5 cm x 42,5 cm	40,5 cm x 45,0 cm	43,0 cm x 52,5 cm	51,0 cm x 45,0 cm
38,0 cm x 40,0 cm	40,5 cm x 47,5 cm	45,5 cm x 42,5 cm	51,0 cm x 47,5 cm
38,0 cm x 42,5 cm	40,5 cm x 52,5 cm	45,5 cm x 45,0 cm	51,0 cm x 52,5 cm
38,0 cm x 45,0 cm	43,0 cm x 42,5 cm	45,5 cm x 47,5 cm	
40,5 cm x 40,0 cm	43,0 cm x 45,0 cm	45,5 cm x 52,5 cm	

Följande är varumärken och registrerade varumärken som tillhör Permobil: ROHO®, ISOFLO®, Stretch-Air® och DRY FLOATATION®.