

Permobil

F5 Corpus[®] VS

HMV-Nr. 18.99.03.2021



permobil

Stehen in allen Situationen

Der F5 Corpus® VS bietet, zusätzlich zu den Vorteilen des Stehens, eine außergewöhnliche Fahrqualität dank der 4-Rad-Einzelradaufhängung sowie alle elektrischen Sitzfunktionen des F5 Corpus.

Mit Sicherheit stehen

Stehen ist ein wirksames Mittel, um eine größere Unabhängigkeit zu fördern. Der F5 Corpus VS verfügt über vollständig programmierbare Abläufe, die es ermöglichen, die Position zu optimieren, sei es beim Stehen, in der Rückenlage, in halb zurückgelehnter Position oder beim Übergang vom Sitzen ins Stehen. Mit dem verstellbaren Brustpolster, den anpassbaren Kniestützen und den elektrisch verstellbaren Fußplatten lassen sich die Stehpositionen weiter optimieren.

Corpus® – folgt den Körperkonturen

Das ergonomische Design des Corpus-Sitzsystems folgt den Körperkonturen. Verbessertes Komfort sowie verbesserte Beckenpositionierung, seitliche Stabilität und Einsinkfähigkeit sind die Hauptmerkmale des neuen Corpus-Kissens.

Active Reach

Für einen erweiterten Aktionsradius wird der Sitz um bis zu 45° nach vorne geneigt und die Sitzfläche angehoben. Dies erweitert die funktionelle Reichweite, um bei Transfers und Ihren täglichen Aktivitäten zu unterstützen.

Active Height

Erlaubt das Fahren mit bis zu 5 km/h bei vollständig ausgefahrenem Sitzlift und lässt sich nahtlos mit *Active Reach* kombinieren, um Ihnen den bestmöglichen Zugang zu Ihrer Umgebung zu ermöglichen.

Agile Federung


Die vollkommen unabhängige Federung auf allen Rädern bietet hervorragenden Fahrkomfort sowie höchste Traktion und Stabilität. Damit ist sie besonders vorteilhaft für aktives Fahren im Freien.

Weiter fahren

Die neue Permobil-Batterie und das Permobil VoltPro-Ladegerät arbeiten optimal zusammen, um Ihnen eine bis zu 25 % größere Reichweite, optimierte Ladezeiten und eine längere Batterielebensdauer zu bieten.

Sichereres Fahren im Dunkeln

LED-Leuchten sorgen vorne und hinten für mehr Helligkeit und bessere Sicht.

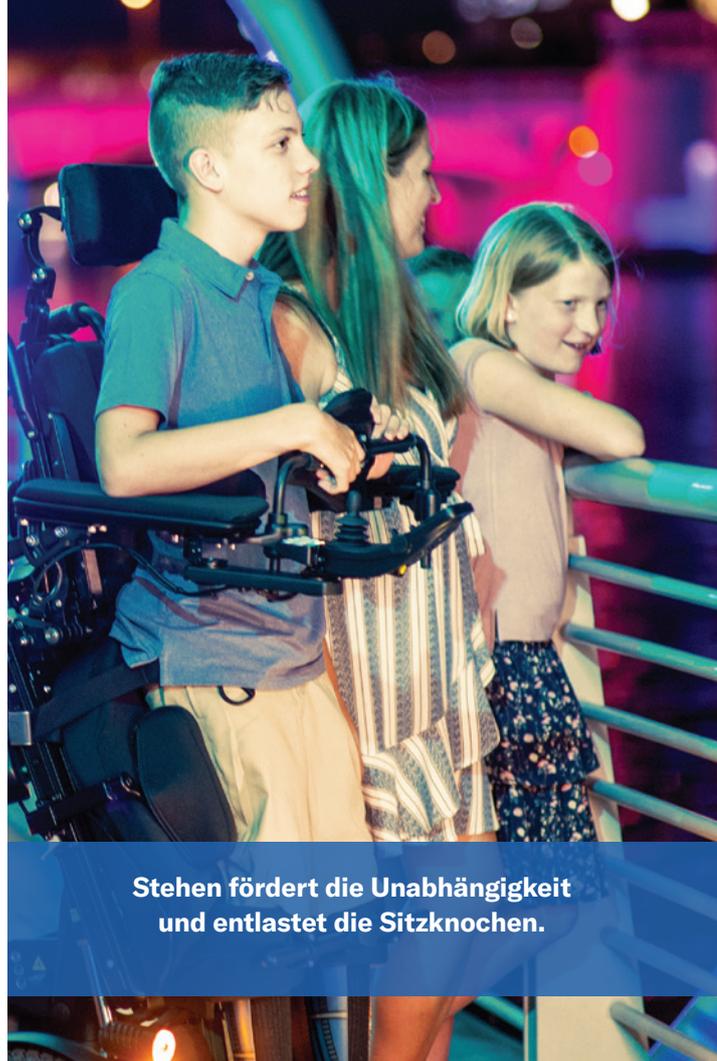

Stehen fördert die Unabhängigkeit und entlastet die Sitzknochen.



Die elektrisch verstellbare Rückenlehne mit mitlaufendem Rücken (Option „RÜCKENLEHNE BIOMECHANISCH“) bewegt sich in die gewünschte Position.

F5 Corpus® VS HMV-Nr. 18.99.03.2021

Spezifikationen

Max. Geschwindigkeit	6 km/h (optional 12 km/h)
Reichweite (G24: 85 Ah-Batterien)	40 km*
Max. Benutzergewicht	136 kg
Hindernisbewältigung (mit Schwung)	50 mm (75 mm)
Min. Wenderadius	1.490 mm
Drehen im Flur	1.200 mm
Federung	unabhängig auf allen Rädern
Elektronik R-Net	120 A
Breite einschl. Sitz	650 - 790 mm
Höhe	1.090 - 1.170 mm
Min. Transportlänge inkl. Antikippstützen	965 mm
Min. Transporthöhe (gefaltete Rückenlehne)	825 mm
Gewicht, einschließlich Batterien (85 Ah)	206 kg
Gewicht der Batterien 85 Ah	2 x 23 kg
Sitzhöhe (mit elektrischer Sitzhöhenverstellung)	450 - 800 mm
Sitztiefe	370 - 570 mm (in 25-mm-Schritten)
Sitzbreite	420 - 570 mm (in 50-mm-Schritten)
Rückenlehnenbreite	360/410/460/510 mm
Rückenlehnenhöhe	470, 545 - 670 mm (in 25-mm-Schritten)
Abstand zwischen Armlehnen	380 - 480/480 - 580 mm
Crash-Test nach ISO 7176-19 – Dahl Dockingstation	Ja, max. 136 kg Benutzergewicht
Crash-Test nach ISO 7176-19 – 4-Punkt-Transportösen	Ja, max. 136 kg Benutzergewicht
Getestet nach EN12182/EN12184 CE	Ja

Ihre persönliche Note



Max. Stehwinkel 70°/80°
(Sitzen zu Stehen oder Liegen zu Stehen)



180° elektrisch verstellbare Rückenlehne



Sitzhöhenverstellung
Active Height 0 - 350 mm



Elektrisch verstellbare Rückenlehne 85 - 180°
Manuell verstellbare Rückenlehne 120°



Sitzkantelung (nach vorne)
*Active Reach** 5 - 45°
20° - 45° VS-Beinstützen erforderlich



*Die Reichweite kann je nach Gewicht des Benutzers, bei häufigem Gebrauch des Rollstuhls an Steigungen, unebenem Untergrund oder häufigem Überfahren von Bordsteinkanten variieren. Maße sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Stehen ermöglicht
die persönliche Interaktion
und sorgt für verbesserte
Gesundheitsergebnisse.

Permobil

F5 Corpus® VS

HMV-Nr. 18.99.03.2021

Entdecken Sie anhand des F5 Corpus VS die vielfältigen Vorteile eines Stehrollstuhls. Er verfügt über alle Leistungsmerkmale des F5 Corpus, ergänzt mit einer überlegenen elektrischen Stehfunktion. Die *Agile* Federung ermöglicht Ihnen ein sicheres Fahren im Stehen bei bis zu 5 km/h.

permobil

permobil.com/de-de



F5CORPUSVSDATASHEETDE220112