

permobil

ROHO® HYBRID ELITE DYNOR



**STABILITET.
TRYCKAVLASTNING.**

ROHO

ROHO HYBRID ELITE SR DYNAN ÄR DESIGNAD FÖR MÄNNISKOR SOM:

Hybrid Elite 1 kammare Sensor Ready

- har haft, riskerar att få eller har idag något stadie av tryckskada
- har normal eller nedsatt känsel
- behöver extra stabilitet
- behöver extra stabilitet vid överflyttning
- behöver justering av nedre extremiteter

Hybrid Elite 2 kamrar

2 kamrar för att motverka bäckenasymmetri (medialt/lateralit), justering upp till 5 cm.



EGENSKAPER

Säkerhet & självständighet med Smart Check

Smart check hjälper dig hålla koll på luftmängden i din dyna. Om din kropp förändras kan du med hjälp av Smart check enkelt checka av och återställa din optimala luftmängd.

Smart check finns endast tillgängligt för Single Valve.

**Positionering**

Den formade skumbasen ger möjlighet till bra placering och kontroll över nedre extremiteter och bäcken.

**Hud/Vävnadsskydd**

Hybrid Elite dynan har en luftfylld del som justeras för att fördela och minska tryck på yta runt de känsliga sittknöarna och bakre delen av trokanter. Den justerbara dynan minskar friktion och skjuvning, hjälper till att förhindra hud och vävnadsskador. Upp till (7 cm) nedsjunkning i dynan.

**Stabilitet**

Den formade basen ger en stabilitet under bäcken och nedre extremiteter som skapar balans och korrekt sittställning. Skapar fördel även vid överflyttning.



SPECIFIKATIONER

Dynan levereras med - tillval tillbehör


Hybrid Elite dyna, tvåvägs stretchöverdrag, skuminsats, luftpump, reparationskit och bruksanvisning. Som tillval finns HD överdrag med vätskeavvisande yta. Smart Check finns endast för Single Valve, säljs separat.

Egenskaper

ROHO DRY FLOATATION® är en luftfylld, justerbar, insats i neopren (inte latex). Formad skumbas tillverkad av vätsketålig polyetencellplast med slutna celler. Skuminsats i HR-polyuretanskum med ett vattenavvisande överdrag.

Storlek, vikt, garanti

Stort utbud av dynor som passar till sitsbredder 36-61 cm
Varierar med storlek på dyna, ca 1.4 kg (baserat på stil dyna 43 cm X 45.5 cm)
Dyna: 24 månader begränsad garanti | Smart Check: 24 månader begränsad garanti | Max användarvikt: 225 kg

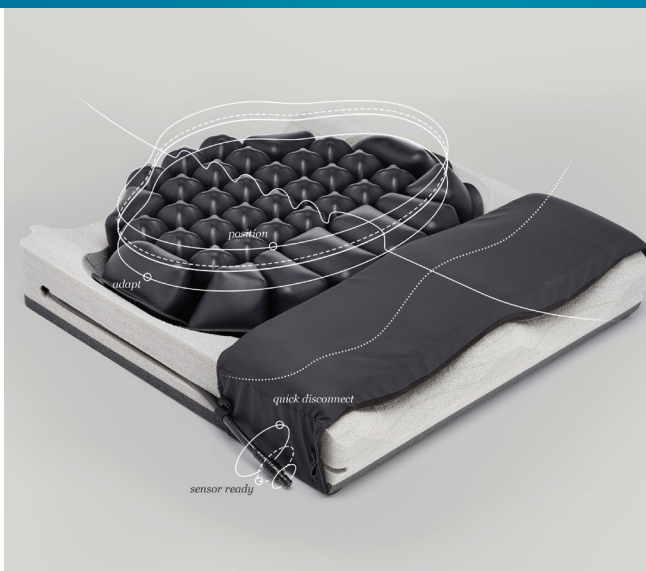

ROHO, Inc.: DRY FLOATATION®, Hybrid Elite SR™, Sensor Ready®, Shape Fitting Technology®, and Smart Check®, and ROHO®.

permobil

ROHO

Permobil AB | Per Uddéns väg 20 | 861 23 Timrå | Tel. 060-59 59 00
info@permobil.com | permobil.se

ROHO, Inc. has a policy of continual product improvement and reserves the right to amend in this document.

